

GT German Telematics GmbH

Chipkartenleser GT90 mobil –Benutzerhandbuch–

Version 1.7 / Deutsch



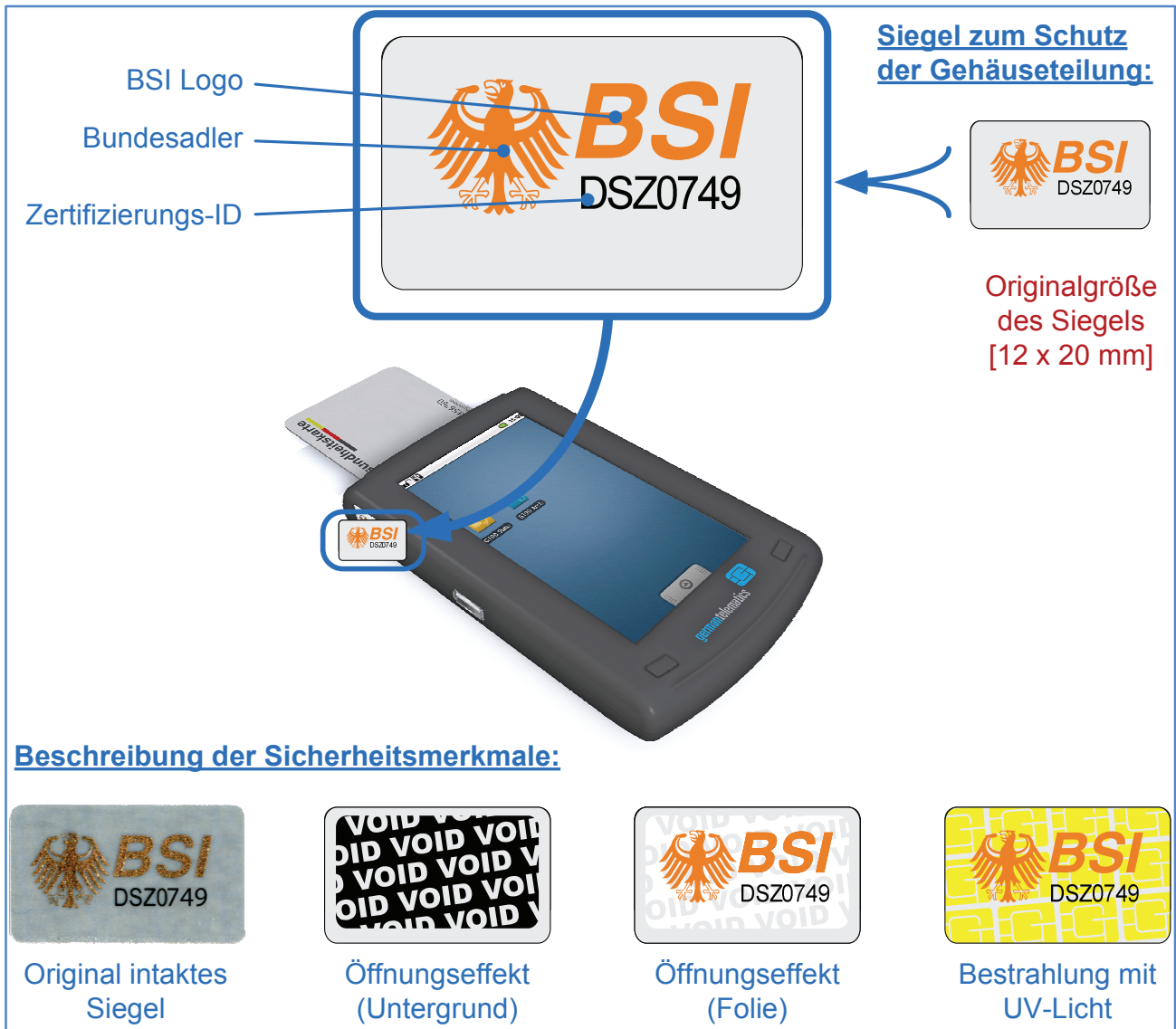


Abbildung 1: Sicherheitsiegel

Prüfen Sie vor jeder Nutzung die Unversehrtheit des Siegels. Bei Manipulationen am Gehäuse wird das Siegel zerstört. Kontaktieren Sie den Hersteller, falls Sie ein zerstörtes Siegel auf Ihrem Gerät vorfinden.

Erklärung der verwendeten Symbole:



Achtung



Hinweis

DIESES BENUTZERHANDBUCH WIRD DURCH DEN HERSTELLER AUSSCHLIEßLICH IN ELEKTRONISCHER FORM ZUR VERFÜGUNG GESTELLT!

SIE FINDEN ES UNTER ANDEREM IN FORM EINER PDF-DATEI AUF DER MITGELIEFERTEN TREIBER-CD IHRES MOBILEN CHIPKARTENLESEGERÄTES.

Der Hersteller des Chipkartenlesers erklärt hiermit die Konformität des Gerätes mit den von der "Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte GmbH" (Gematik) vorgegebenen Richtlinien zum Aufbau einer Telematik-Infrastruktur für das deutsche Gesundheitswesen. Das Chipkartenlesegerät GT90 **mobil** wurde speziell für die elektronische Gesundheitskarte entwickelt und erfüllt alle Anforderungen für den sicheren Umgang mit schutzwürdigen Daten. Das Ihnen vorliegende Gerät ist von der gematik GmbH bis auf Widerruf* für die Benutzung innerhalb der Telematikinfrastruktur für das deutsche Gesundheitswesen zugelassen.

Benutzerhandbuch Identifikation:

Titel:

Chipkartenleser GT90 **mobil**
Benutzerhandbuch

Version:

1.7/ Deutsch

Ausgabedatum:

1. Juni 2011

Geräte Identifikation:

Bezeichnung:

Mobiles Chipkartenlesegerät
GT90 **mobil**

Hardware-Versionen:

1.1.0 sw Farbvariante: schwarz
1.1.0 we Farbvariante: weiß
1.1.0 si Farbvariante: silber

Bestätigungskennung:

ZLS_mobKT_gtG_000066

Zertifizierungskennung:

BSI-DSZ-CC-0749

Hersteller:

German Telematics GmbH
Rankestraße 26
10789 Berlin

*Widerruf - In ihrer Funktion als Zulassungsstelle kann die gematik Zulassungen widerrufen, wenn die Zulassung auf nicht mehr gegebenen Voraussetzungen (Geräteeigenschaften, Rahmenbedingungen) beruht, neue sicherheitstechnische Erkenntnisse vorliegen oder gravierende Änderungen an den Prüfspezifikationen notwendig waren. Im Fall des Widerrufs einer Zulassung einer Komponente informiert die gematik den Antragsteller unter Angabe von Gründen und verpflichtet ihn, die Zulassungsurkunde an die gematik zurückzugeben. Die Eintragung der betroffenen Komponente in der Liste erfolgter Zulassungen wird von der gematik gelöscht.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie alle in dem Benutzerhandbuch beschriebenen Sicherheitshinweise und halten sie diese sorgfältig ein. Bewahren Sie die Sicherheitshinweise auf. Beachten Sie zudem alle Warnungen, die an dem Gerät angebracht sind.

- Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes das Benutzerhandbuch sorgfältig durch.
- Bevor Sie mit der Installation und Inbetriebnahme des Gerätes und der erforderlichen Komponenten beginnen, versichern Sie sich der Unversehrtheit des Gerätes. Lesen Sie bitte dazu das Kapitel 2 „Spezielle Sicherheitshinweise“ sorgfältig durch.
- Verwenden Sie ausschließlich solche Chipkarten mit dem Gerät, welche für die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte durch die gematik GmbH vorgesehen sind.
- Verwenden Sie für das Chipkartenlesegerät nur die im Lieferumfang enthaltenen Anschlusskabel.
- Das Entfernen der Akkus führt dazu, dass das Gerät nicht betrieben werden kann.
- Öffnen Sie den Akku nicht gewaltsam, werfen Sie ihn nicht ins offene Feuer und schließen Sie ihn niemals kurz.
- Öffnen Sie das Gerät nicht gewaltsam, lassen Sie es nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Berühren Sie den Touchscreen nie mit scharfen Gegenständen oder nassen Händen.
- Achten Sie darauf, dass kein Staub, keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Innere des Gerätes gelangen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Kurzschlusses.
- Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser. Das Gerät ist nicht wasserfest.
- Verwenden Sie für den Wiederversand und sonstigen Transport des Gerätes die Originalverpackung oder eine andere geeignete Verpackung, die Schutz gegen Stoß, Schlag, Feuchtigkeit und elektrostatische Entladung gewährt.

- Achten Sie beim Wiederversand des Gerätes darauf, dass dieses vor Manipulationen Dritter geschützt ist. Treffen Sie dafür geeignete Maßnahmen.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Sorgen Sie für eine umweltgerechte Entsorgung des Gerätes.



Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden und Verletzungen, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise entstehen sollten.

Inhaltsverzeichnis

<u>ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE</u>	4
<u>1. CHIPKARTENLESEGERÄT GT90 MOBIL</u>	8
<u>2. SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE</u>	9
2.1 SICHTKONTROLLE	9
2.2 SICHERE EINSATZUMGEBUNG	11
<u>3. GERÄTEBESCHREIBUNG GT90 MOBIL</u>	14
3.1 LIEFERUMFANG	14
3.2 ÜBERSICHT GT90 mobil	14
TOUCHSCREEN	15
3.3 GT90 mobil RÜCKANSICHT	16
MICRO SD-KARTE EINLEGEN	17
AKKU EINLEGEN	18
AKKU LADEN	18
EINLEGEN EINES HEILBERUFSAUSWEISES	19
3.4 REINIGEN UND DESINFIZIEREN DES GT90 mobil	19
<u>4. NUTZUNG</u>	20
4.1 AUTHENTIFIZIERUNG	20
ADMIN-PIN UND BENUTZER-PIN	20
PIN-EINGABE	21
SPERRZEITEN BEI FALSCHER PIN-EINGABE	22
4.2 INBETRIEBNAHME	23
AKKU LADEN	23
TREIBERINSTALLATION	23
GERÄT EIN-/AUSSCHALTEN	24
AUTOMATISCHE FIRMWAREPRÜFUNG	24
ERSTINBETRIEBNAHME	25
DESKTOP	27
HAUPTMENÜ	29
4.3 GT90 STATUS	31
CHIPKARTE EINLESEN	31
4.4 GT90 ARCHIV	33
PATIENTENDATEN LESEN UND DRUCKEN	33
PATIENTENDATEN LÖSCHEN	35

GT90 ARCHIV MENÜ	36
PATIENTENARCHIV KONFIGURIEREN	36
KONFIGURATION DES CHIPKARTENLESERS UND GT90 ARCHIV	37
GT90 mobil MIT IHREM AIS SYNCHRONISIEREN	41
4.5 GT90 ADMIN	42
FW-VERSION, SERIEN- UND ZULASSUNGSNUMMER ANZEIGEN	43
FW-INFO	43
DATUM UND ZEIT EINSTELLEN	44
VORBEREITEN EINES FIRMWARE-UPDATES	46
DURCHFÜHRUNG EINES FIRMWARE-UPDATES	48
BENUTZER-PIN NACH VERLUST ZURÜCKSETZEN	51
ADMIN-PIN ÄNDERN	51
WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN	52
4.6 EINSTELLUNGEN	53
SOUND UND DISPLAY	53
GERÄTEINFORMATIONEN	54
SPRACHE UND TASTATUR	55
DATUM UND UHRZEIT	57
4.7 WECKER	58
4.8 TASCHENRECHNER	59
<u>5. PROBLEMBEHEBUNG</u>	<u>60</u>
<u>6. WEITERE INFORMATIONEN</u>	<u>62</u>
6.1 GERÄTENSORGUNG	62
6.2 TECHNISCHE DATEN	63
6.3 SYSTEMVORAUSSETZUNGEN	64
6.4 REALISIERTE SICHERHEITSFUNKTIONEN	65
6.5 PRODUKTREGISTRIERUNG	66
6.6 ALLGEMEINE INFORMATIONEN	66
6.7 GERÄTE-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG	67

1. CHIPKARTENLESEGERÄT GT90 MOBIL

Das GT90 **mobil** ist ein tragbares Chipkartenlesegerät. Das GT90 **mobil** wurde speziell für Chipkarten entwickelt, wie sie im deutschen Gesundheitswesen eingesetzt werden. Im Besonderen gehören dazu die Krankenversicherungskarte (KVK), die elektronische Gesundheitskarte (eGK) und der Heilsberufsausweis (HBA).

Die auf den Chipkarten gespeicherten Patientendaten können Sie mit dem GT90 **mobil** auslesen und verwalten. Die mitgelieferte Firmware stellt dafür drei Programme: *GT90 Status*, *GT90 Archiv* und *GT90 Admin* bereit. Die Firmware ist von der gematik GmbH zertifiziert, d.h. das GT90 **mobil** erfüllt die geltenden Sicherheitsanforderungen für den Umgang mit den schutzwürdigen Patientendaten.

Darüber hinaus wird die Firmware aktualisiert und jede bereitgestellte Firmware-Version von der gematik GmbH zertifiziert.

Der ärztliche Alltag wird Ihnen durch das automatische Einlesen gesteckter Karten und den leistungsstarken Akku (bis zu 300 h Laufzeit im Stand-by Modus) erleichtert. Das Gerät zeichnet sich auch durch einen bedienfreundlichen Touchscreen aus, dessen glatte Oberfläche ein schnelles und einfaches Desinfizieren des Gerätes ermöglicht.




2. SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE



Um den für die Nutzung des Gerätes erforderlichen Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden, müssen sämtliche im Zusammenhang mit dem Gerät geltenden Sicherheitshinweise genau beachtet und sorgfältig eingehalten werden.

2.1 Sichtkontrolle

Ein Sicherheitssiegel klebt auf der Trennlinie zwischen dem Gehäuseunter- und Gehäuseoberteil auf der linken Seite des Gerätes.

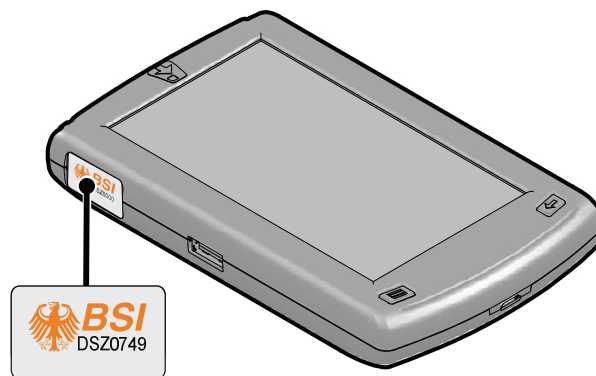

Prüfen Sie das Gerät und das Siegel regelmäßig auf Unversehrtheit.

Mit folgenden Methoden können Sie die Echtheit des Siegels und somit dessen Unversehrtheit überprüfen.

UV-Bestrahlung des Siegels

Auf dem Siegel ist ein Muster angebracht, das bei UV-Licht sichtbar wird. Mit bloßem Auge ist das Muster nicht erkennbar.

- 1 Halten Sie das Siegel unter eine gewöhnliche UV-Lampe oder unter ein Geldschein-Prüfgerät.

Ein unversehrtes Siegel zeigt bei UV-Licht ein Muster bestehend aus stilisierten Chiplogos. Sie finden das Muster zum Vergleich auf der inneren Umschlagseite des Benutzerhandbuches (S. 2; Abbildung 1: Sicherheitssiegel).

Tastprüfung des Siegels

- 1 Fahren Sie mit einem Finger über das Siegel.
Bei einem unversehrten Siegel können Sie die erhabene Ausgestaltung des Bundesadlers und des BSI-Logos haptisch erfassen.

Sichtprüfung des Siegels

- 1 Achten Sie auf irreversible Veränderungen am Siegel, zum Beispiel:
 - mechanische Beschädigung des Siegels z.B. durch Schnitte, Zerknitterungen, Wellungen u.ä.
 - verändertes Siegellayout. Sie finden in der Abbildung 1: Sicherheitssiegel“ die Siegellayoutveränderungen dargestellt, die durch Manipulation des Siegels entstehen.
- 2 Achten Sie auf Farbveränderungen am Bundesadler und am BSI-Logo auf dem Siegel.
 - Durch Ankippen des Gerätes wechselt die Farbe auf dem Siegel. Der übliche Farbwechsel ist von Rot über Ocker zu Grün.

Sichtprüfung des Gerätes

- 1 Achten Sie auf irreversible offensichtliche Veränderungen am Gehäuse , zum Beispiel:
 - mechanische Beschädigung des Gehäuses z.B. durch Schnitte, Ausbrüche u.ä.
 - Abweichungen vom gewohnten Aussehen des Gerätes bzw. von den in diesem Benutzerhandbuch gezeigten Abbildungen.
- 2 Achten Sie auf Fremdkörper, die in Kontakt mit dem Terminal stehen und möglicherweise eine Manipulation erkennen lassen.
 - Elektronische Bauteile, Kabel und Leitungen - einschließlich haarfeiner Drähte - die am Gerät befestigt sind.
 - Überprüfen Sie auch das Innere des Akku-Faches auf mögliche Manipulationen. Heben Sie hierfür den Deckel vom Gerät ab.

- 3 Achten Sie auf die eindeutige Kennzeichnung Ihres Gerätes auf dem Geräteaufkleber. Dieser befindet sich wie in Abbildung 2 dargestellt unter dem Akku.
- Der Geräteaufkleber weist die eindeutige Zulassungskennung des BSI auf. Die Kennnummer ist dieselbe wie auf dem Gehäusesiegel.
 - Der Geräteaufkleber weist eine eindeutige Hardwarekennung Ihres Gerätes auf. Diese Hardwarekennung enthält auch Informationen über Ihre Gerätefarbe.



Wenden Sie sich an den Hersteller, wenn das Siegel oder das Gerät beschädigt sind bzw. wenn Sie Zweifel an der Echtheit des Siegels oder des Gerätes haben.

2.2 Sichere Einsatzumgebung



Das Chipkartenlesegerät darf nur in überwachten Umgebungen eingesetzt und aufbewahrt werden. Unbefugten Personen ist der Zugriff auf das Gerät zu verwehren. Es sind die Folgenden Vorschriften an eine sichere Einsatzumgebung umzusetzen:

- Während der Inbetriebnahme muss sich das Gerät in unmittelbarer Reich- und Sichtweite des Nutzers (Leistungserbringer oder Administrator) befinden.
- Während der Nutzung des mobilen Chipkartenlesegerätes muss sich dieses unter der ständigen Kontrolle des Leistungserbringers oder des Administrators befinden.
- Das Gerät darf nur an Host-Geräte (PC-Systeme) angeschlossen werden, die unter der alleinigen Kontrolle des betreuenden Systemadministrators stehen.
- Bei Nichtbenutzung und bei längerer Abwesenheit des Nutzers (Leistungserbringer oder Administrator) muss das Gerät verschlossen in einem sicheren Bereich aufbewahrt werden, so dass Unbefugte keinen Zugang zu dem Gerät haben. Es ist zu


gewährleisten, dass ein Eindringen in diesen sicheren Bereich erkennbar ist.

- Sollte das Gerät längere Zeit unbeaufsichtigt gewesen sein, so ist eine Sichtprüfung des Siegels als auch des Gehäuses wie in Abschnitt 2.1 „Sichtkontrolle“ beschrieben, vorzunehmen.

Wenn von diesen Vorschriften abgewichen wurde, muss das Gerät einer fachkundigen Prüfung durch den Hersteller unterzogen werden.

Das Gerät ist unverzüglich auszutauschen, wenn ein Einbruch in den sicheren Bereich detektiert wurde in welchem sich das mobile Chipkartenlesegerät befand. Ein Austausch ist in diesem Falle auch dann vorzunehmen, wenn keine sichtbaren Spuren einer Manipulation am Gerät erkennbar sind.

Geräteunterseite

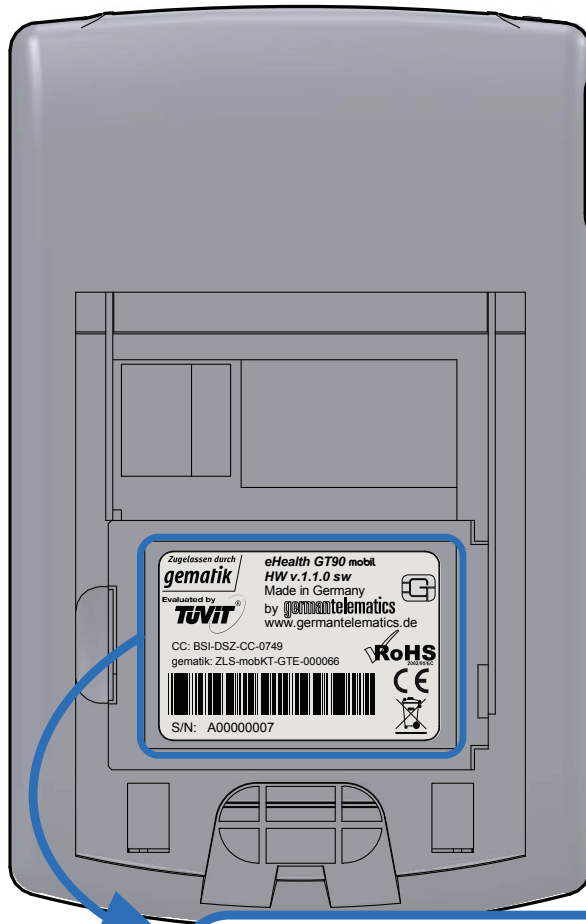

Bezeichnung	Gerätefarbe
HW V.1.1.0 sw	schwarz
HW V.1.1.0 we	weiss
HW V.1.1.0 si	silber

Modellbezeichnungen

Modellbezeichnung und Informationen über den Hersteller

Gematik-Logo

TÜVIT-Logo

Zertifizierungs-ID
gematik - Kennung

Eindeutige Seriennummer des jeweiligen Gerätes
Barcode der Seriennummer des jeweiligen Gerätes

Kennzeichnung der Produktsicherheit und Umwelt-Informationen



Abbildung 2: Aufkleber auf der Geräteunterseite, im Batteriefach des Gerätes

3. GERÄTEBESCHREIBUNG GT90 MOBIL


3.1 Lieferumfang

Im Lieferumfang Ihres Gerätes sind enthalten:

- ein Chipkarteseegerät GT90 **mobil**
- eine CD mit Treibern und diesem Benutzerhandbuch
- ein USB-Kabel (USB zu Micro USB)

3.2 Übersicht GT90 **mobil**

BEDIENELEMENTE

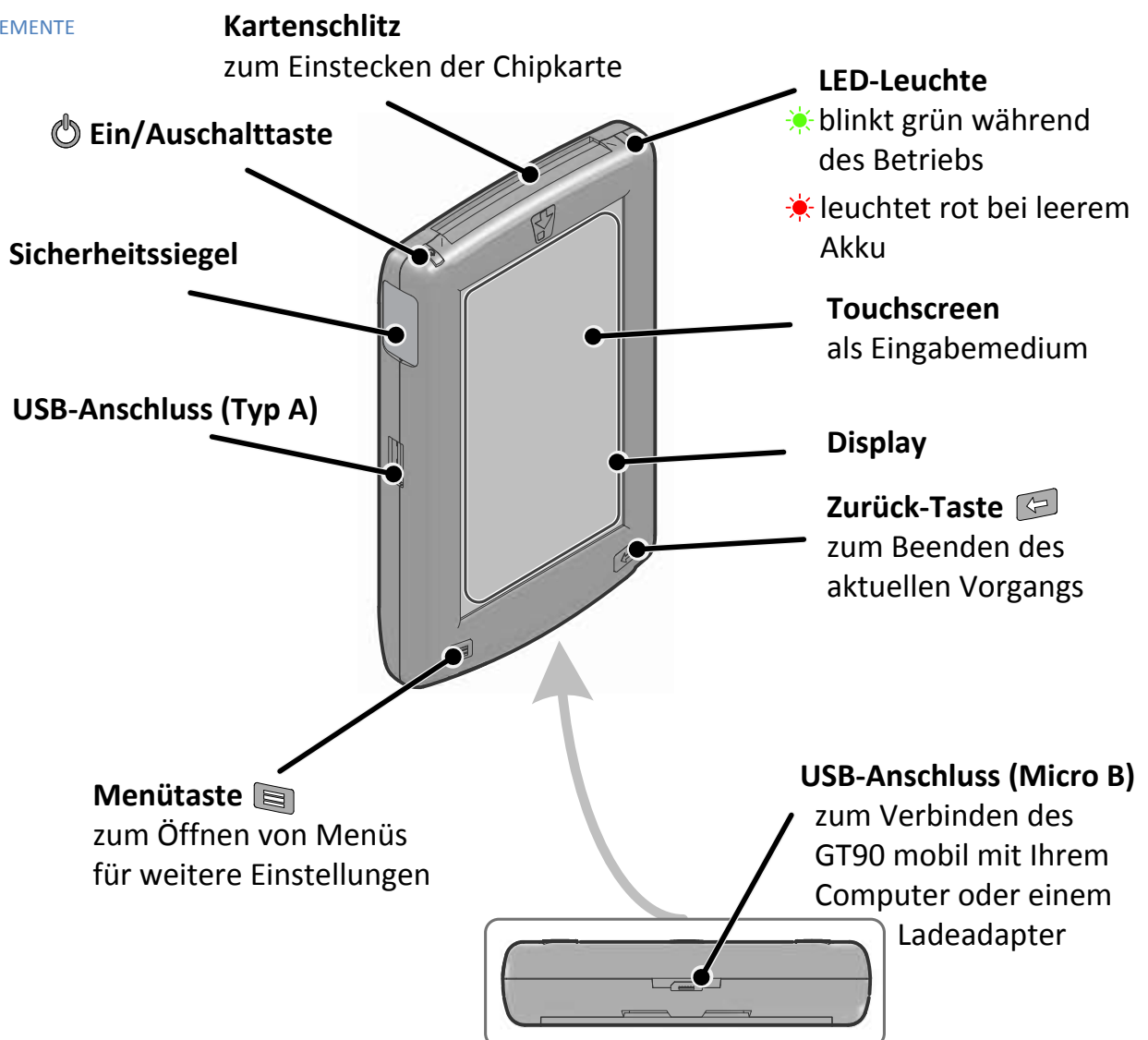

Touchscreen

Zur Bedienung des Touchscreens verwenden Sie einen geeigneten Eingabestift (nicht im Lieferumfang enthalten) oder Ihre Finger.

BEDIENUNG
TOUCHSCREEN




Vermeiden Sie das Kratzen auf der Oberfläche des Touchscreens. Verwenden Sie nie richtige Stifte oder andere spitze Gegenstände, um auf dem Touchscreen zu schreiben. Berühren Sie den Touchscreen nie mit nassen Fingern.

Tippen und Drücken

Um ein Objekt zu öffnen, tippen Sie in der Regel mit dem Stift oder Ihrem Finger auf das Objekt.

Für bestimmte Aktionen, wie z.B. zum Löschen von Daten, halten Sie den Stift oder Ihren Finger länger auf das Objekt („drücken“).

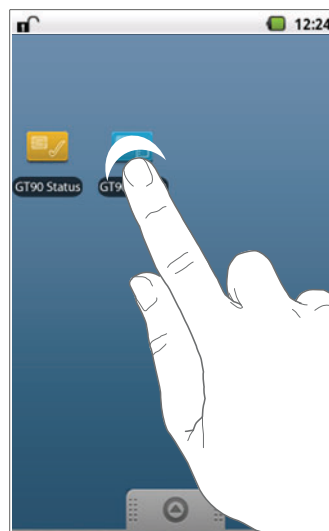


Ziehen

Zum Navigieren z.B. innerhalb eines Programmes setzen Sie den Stift auf dem Touchscreen ab und ziehen ihn in die gewünschte Richtung.

In der Regel werden Ihnen Steuerelemente angezeigt, die Ihnen die Navigation erleichtern. Sie können beispielsweise den Rollbalken nutzen, um in den Patientendaten zu blättern.



3.3 GT90 mobil Rückansicht

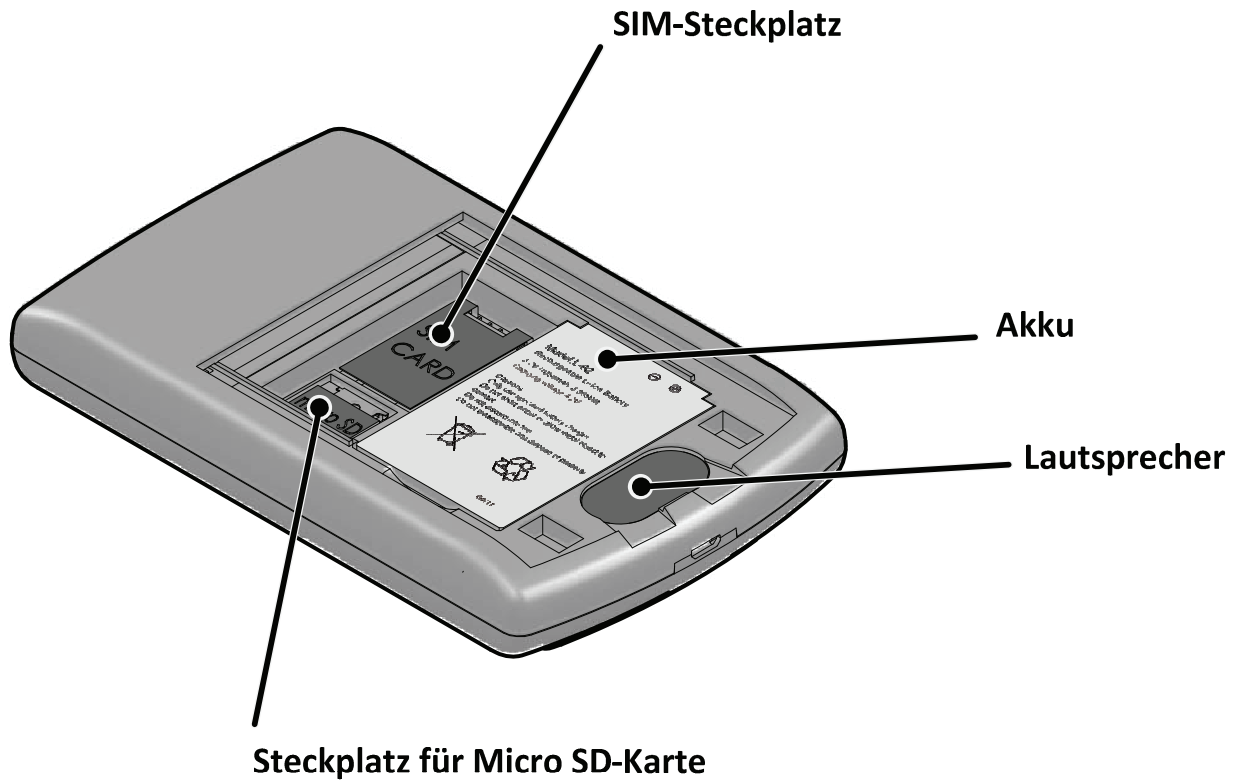

Micro SD-Karte einlegen

Eine Micro SD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie können jede Micro SD-Karte mit bis zu 32GB Speicher in Ihrem GT90 verwenden.





MICRO SD-KARTE



Beachten Sie, dass eine Micro SD-Karte ausschließlich bei ausgeschaltetem Gerät eingelegt oder herausgenommen werden sollte.

Legen Sie eine Micro SD-Karte wie folgt beschrieben in das Gerät ein:


- 1 Schalten Sie das Gerät aus.
- 2 Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite des Gerätes.
- 3 Schieben Sie die Micro SD-Kartenhalterung nach oben.
- 4 Entnehmen Sie ggf. die aktuelle Micro SD-Karte.
- 5 Legen Sie Ihre Micro SD-Karte in den vorgesehenen Steckplatz ein.
- 6 Schieben Sie die Kartenhalterung nach unten und verriegeln Sie diese bis sie einrastet.
- 7 Schließen Sie das Batteriefach.

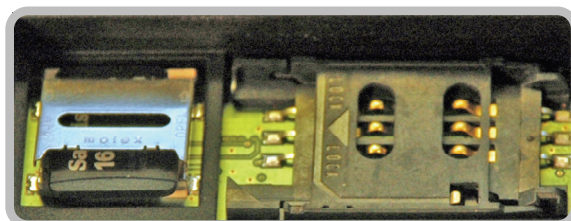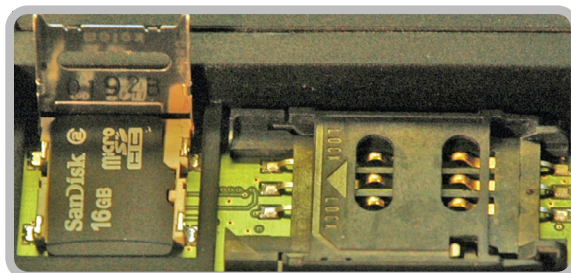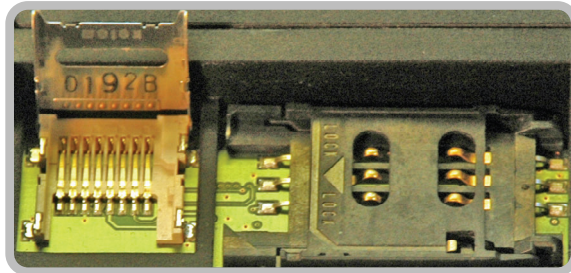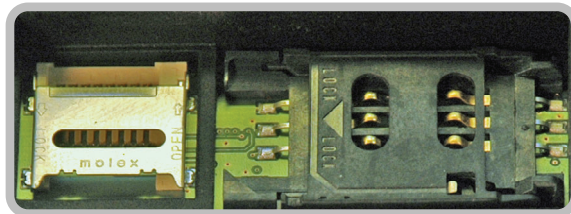

Akku einlegen

AKKU EINLEGEN

Das Gerät ist werkseitig mit einem austauschbaren Lithium-Polymer Akku versehen. Verwenden Sie bitte nur Akkumulatoren, die von Ihrem Hersteller unterstützt werden. Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Orientierung des Akkus. Legen Sie den Akku wie gezeigt in das Batteriefach ein.

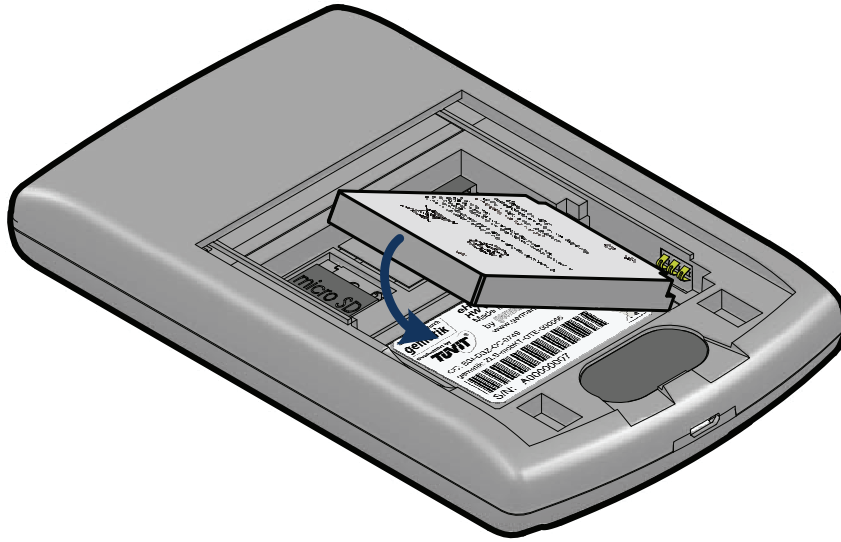

Akku laden


AKKU-LADEN

- 1 Verbinden Sie das Gerät mit Ihrem Computer oder einem USB-Ladeadapter über das mitgelieferte USB-Kabel.
- 2 Wenn der Akku vollständig geladen ist, können Sie das Ladekabel oder das USB-Kabel von dem Gerät entfernen.

Einlegen eines Heilberufsausweises

Das Chipkartenlesegerät besitzt bereits eine Chipkarten-Kontaktiereinheit für den Heilberufsausweis (HBA). **Der HBA wird jedoch in der derzeitigen Ausbaustufe 1 des Gerätes nicht unterstützt.** Die Funktionen zur Nutzung des HBAs werden durch ein Firmware-Update zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt.

HBA EINLEGEN

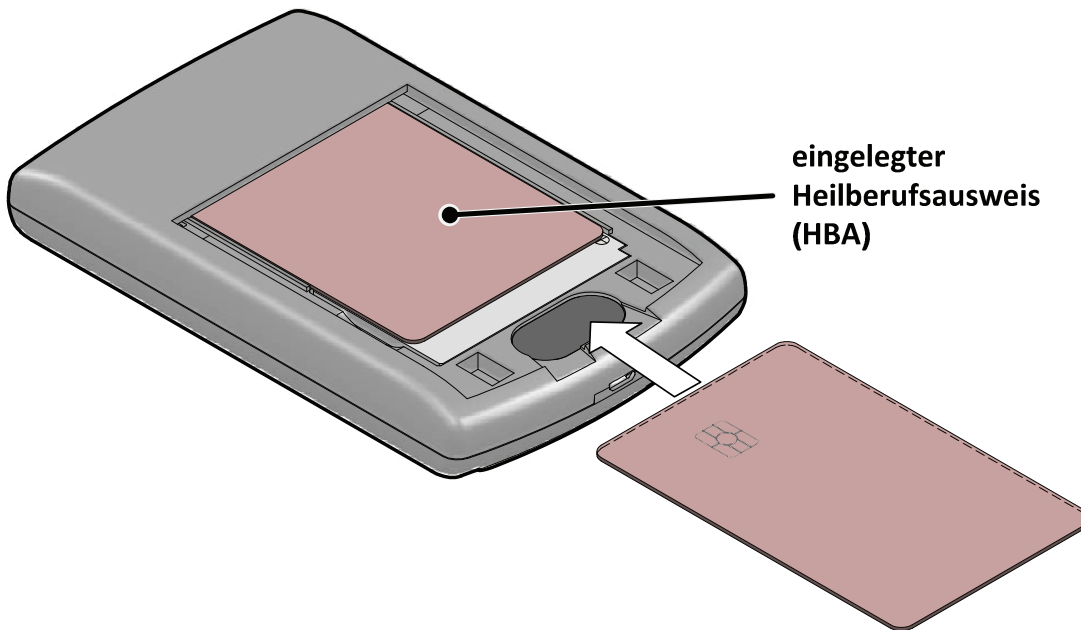

3.4 Reinigen und Desinfizieren des GT90 mobil

Das Chipkartenlesegerät ist in regelmäßigen Abständen zu reinigen und zu desinfizieren. Benutzen Sie zur Reinigung keine Aerosole, Lösungs- oder Scheuermittel. Setzen Sie das Siegel auf dem Gehäuse keiner erhöhten Belastung aus. Die Reinigung erfolgt günstiger Weise mit einem angefeuchteten Tuch oder einem speziellen feuchten Desinfektionstuch.

REINIGEN

4. NUTZUNG

4.1 Authentifizierung

Für bestimmte Einstellungen und Programme müssen Sie sich mit einer PIN anmelden. Dadurch werden die sensiblen Patientendaten vor dem Zugriff unbefugter Personen geschützt. Bei der Anmeldung wird zwischen der Benutzer-PIN und der Administrator-PIN (Admin-PIN) unterschieden.

Admin-PIN und Benutzer-PIN

Die Admin-PIN und die Benutzer-PIN werden bei der Erstinbetriebnahme des Gerätes vergeben. Die Admin-PIN besteht aus mindestens acht Ziffern. Die Benutzer-PIN muss aus mindestens vier Ziffern bestehen. Beide PIN müssen nach einem Firmware-Update erneut festgelegt werden.



Bewahren Sie die PIN an einem sicheren Ort auf. Vermeiden Sie, die PIN in der Nähe des Gerätes aufzubewahren. Verwenden Sie **keine triviale PIN**, wie z.B. 1111111 oder 12345678. Geben Sie die PIN niemals weiter. Achten Sie darauf, dass Sie bei der PIN-Eingabe nicht beobachtet werden.

Für folgende Einstellungen müssen Sie mit der Admin-PIN angemeldet sein:

- ADMIN-PIN
- Firmware aktualisieren (Firmware-Update)
 - Datum und Zeit einstellen
 - Admin-PIN ändern
 - Benutzer-PIN zurücksetzen (nach Verlust)



Für folgende Einstellungen müssen Sie mit der Benutzer-PIN angemeldet sein:

- BENUTZER-PIN
- Patientendaten anzeigen
 - Patientendaten löschen
 - Benutzer-PIN ändern

- Dateiformat für Synchronisierung festlegen
- Synchronisieren des GT90 **mobil** mit Ihrem Informationssystem

PIN-Eingabe

Geben Sie die PIN über die Zifferntastatur ein, die auf dem Display angezeigt wird. Achten Sie bei der Eingabe darauf, dass Ihnen in der Statuszeile der **sichere Eingabemodus** durch ein geschlossenes Schlosssymbol angezeigt wird! Ihre Eingaben werden Ihnen als * dargestellt. Eine Anzeige der PIN im Klartext erfolgt zu keinem Zeitpunkt.

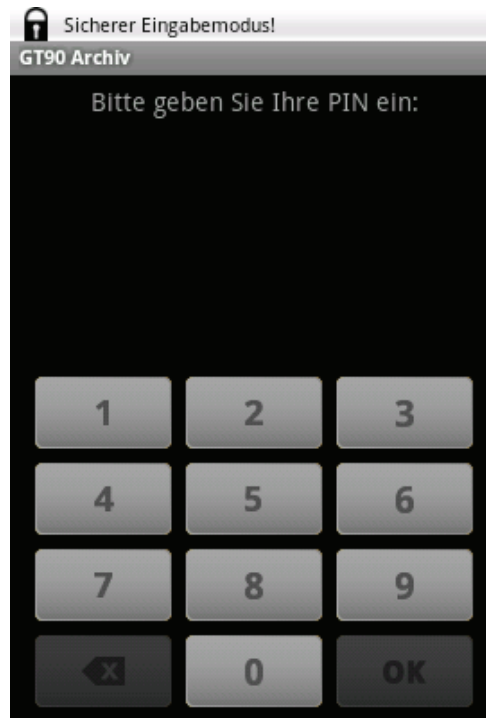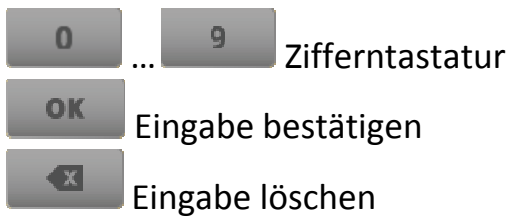

Sollten Sie ihre PIN-Eingabe nicht mit dem drücken des OK-Buttons bestätigen, wird die PIN-Eingabe nach einer Minute automatisch abgebrochen.

Sperrzeiten bei falscher PIN-Eingabe

Wenn Sie die Benutzer- oder die Admin-PIN dreimal falsch eingegeben haben, ist eine erneute Eingabe erst nach einem festgelegten Zeitraum wieder möglich. Die Sperrzeiten für PIN-Eingabe finden Sie in der Tabelle 1.

Anzahl der aufeinanderfolgenden ungültigen PIN-Eingabe	Mindestsperrzeit für die PIN-Eingabe
3-6	1 Minute
7-10	10 Minuten
11-20	1 Stunde
Ab 21	1 Tag

Tabelle 1: Sperrzeiten bei falscher PIN-Eingabe

4.2 Inbetriebnahme

Akku laden

Der Akku wurde werkseitig geladen. Dennoch wird empfohlen, das Gerät bei der Erstinbetriebnahme zu laden. Das Gerät kann jedoch während des Ladevorgangs verwendet werden.

AKKU LADEN

Treiberinstallation

Ob das GT90 **mobil** mit Ihrem Informationssystem (AIS¹, KIS² oder ZIS³) kompatibel ist, erfahren Sie bei Ihrem Systembetreuer bzw. Ihrem Systemhaus. Bitte stellen Sie vor Inbetriebnahme und Anschluss des Gerätes an Ihren PC sicher, dass Sie die Treiber ordnungsgemäß installiert haben. Die Treiber für diverse Betriebssysteme finden Sie auf der mitgelieferten CD.

TREIBER

Unter Microsoft Windows ist eine fehlerfreie Installation des Gerätes erst ab Windows XP mit installiertem Service Pack 3 gewährleistet. Gehen Sie für eine Treiberinstallation unter Windows wie folgt vor:

- 1 Legen Sie die CD in Ihren Computer. Der Setup-Assistent wird gestartet.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen des Setup-Assistenten.
- 3 Falls der Setup-Assistent nicht startet, öffnen Sie die eingelegte CD mit einem Doppelklick. Starten Sie das Installationsprogramm Setup.exe mit einem Doppelklick. Folgen Sie den Anweisungen des Setup-Assistenten.
- 4 Nach einer erfolgreichen Installation der Treiber wird das GT90 **mobil** von Ihrem Computer erkannt.

Aktualisierte Installationshinweise und Treiber finden Sie auch unter:

<http://www.germantelematics.de> .

¹ Arztinformationssystem

² Krankenhausinformationssystem

³ Zahnarztinformationssystem.

Gerät ein-/ausschalten

EIN-UND AUSSCHALTEN

Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste für mindestens drei Sekunden gedrückt. Beim Ausschalten des Gerätes wird Ihnen ein Dialogfenster angezeigt. Tippen Sie auf *Ok*, um das Gerät auszuschalten.

STAND-BY

Zum Einstellen des Stand-By für Ihr eingeschaltetes Gerät, halten Sie die Ein-/Ausschalttaste für ungefähr drei Sekunden gedrückt.

Automatische Firmwareprüfung

FIRMWAREPRÜFUNG

Ihr Chipkartenlesegerät führt bei jedem Neustart des Gerätes eine umfangreiche Firmwareprüfung durch. Diese Prüfung läuft vollständig automatisiert ab und wird Ihnen im Display des Gerätes durch den Wortlaut „Verifying Firmware“ angezeigt.

Ist die Firmwareprüfung erfolgreich, so wird Ihnen dies durch die folgende Displayanzeige vermittelt.

Verifying Firmware PASS



War die Überprüfung der Firmware nicht erfolgreich, so wird Ihnen dies durch den Wortlaut **Verifying Firmware FAILED** im Display des Chipkartenlesers angezeigt, so wie dies in der folgenden Abbildung zu sehen ist.

Verifying Firmware FAILED



Das Gerät schaltet sich nach der Anzeige einer fehlerhaft erfolgten Firmwareprüfung selbstständig aus.



Kontaktieren Sie umgehend den Hersteller wenn die Firmwareprüfung Ihres Gerätes fehlerhaft war.

Erstinbetriebnahme

GT90 SETUP WIZARD

Beim Einschalten des Gerätes und erstmaligem Starten einer der Anwendungen: *GT90 Status*, *GT90 Archiv* oder *GT90 Admin* wird der Setup-Assistent *GT90 Setup Wizard* ausgeführt. Um diesen Vorgang aktiv einzuleiten, tippen Sie auf eines der Symbole (z.B: *GT90 Archiv*) auf dem Desktop Ihres Gerätes. Der sich nun öffnende *GT90 Setup Wizard* wird Sie bei der Erstinbetriebnahme begleiten. Bei der Erstinbetriebnahme des Gerätes werden Sie

- die Admin-PIN und die Benutzer-PIN festlegen
- und Datum /Zeit einstellen.

Startfenster des *GT90 Setup Wizard*:

Tippen Sie in dem Startfenster auf *Fortfahren* und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



- 1 Sie werden aufgefordert, die Admin-PIN festzulegen.
Geben Sie mind. acht Ziffern ein. Im nächsten Schritt wiederholen Sie Ihre Eingabe.
- 2 Sie werden aufgefordert, die Benutzer-PIN festzulegen.
Geben Sie mind. vier Ziffern ein und wiederholen Sie im nächsten Schritt Ihre Eingabe.
- 3 Sie werden aufgefordert, das Datum und die Zeit einzustellen.
Ein Einstellungsmenü wird Ihnen angezeigt. Führen Sie nun folgende Handlungen durch:

Datum einstellen

- 1 Tippen Sie auf *Datum festlegen*.
Ein Dialogfenster zur Einstellung des Tags, Monats und Jahres wird Ihnen angezeigt.
- 2 Geben Sie über das Dialogfenster das aktuelle Datum ein.

Zeitzone ändern

- 1 Tippen Sie auf *Zeitzone auswählen*.
Eine Liste von Städten/Zeitzone wird Ihnen angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf die aktuelle Zeitzone.

Zeit einstellen

- 1 Tippen Sie auf *Uhrzeit festlegen*.
Ein Dialogfenster zur Einstellung der Stunden und Minuten wird Ihnen angezeigt.
- 2 Geben Sie über das Dialogfenster die aktuelle Uhrzeit ein.


Zusätzlich können Sie das Format für Zeit und Datum auswählen.

- 4 Wenn Sie das Datum und die Zeit eingestellt haben, können Sie den *GT90 Setup Wizard* beenden. Drücken Sie dafür die Zurück-Taste.
Der Desktop wird Ihnen angezeigt.

Desktop

Der Desktop besteht standardmäßig aus:

DESKTOP AUFBAU

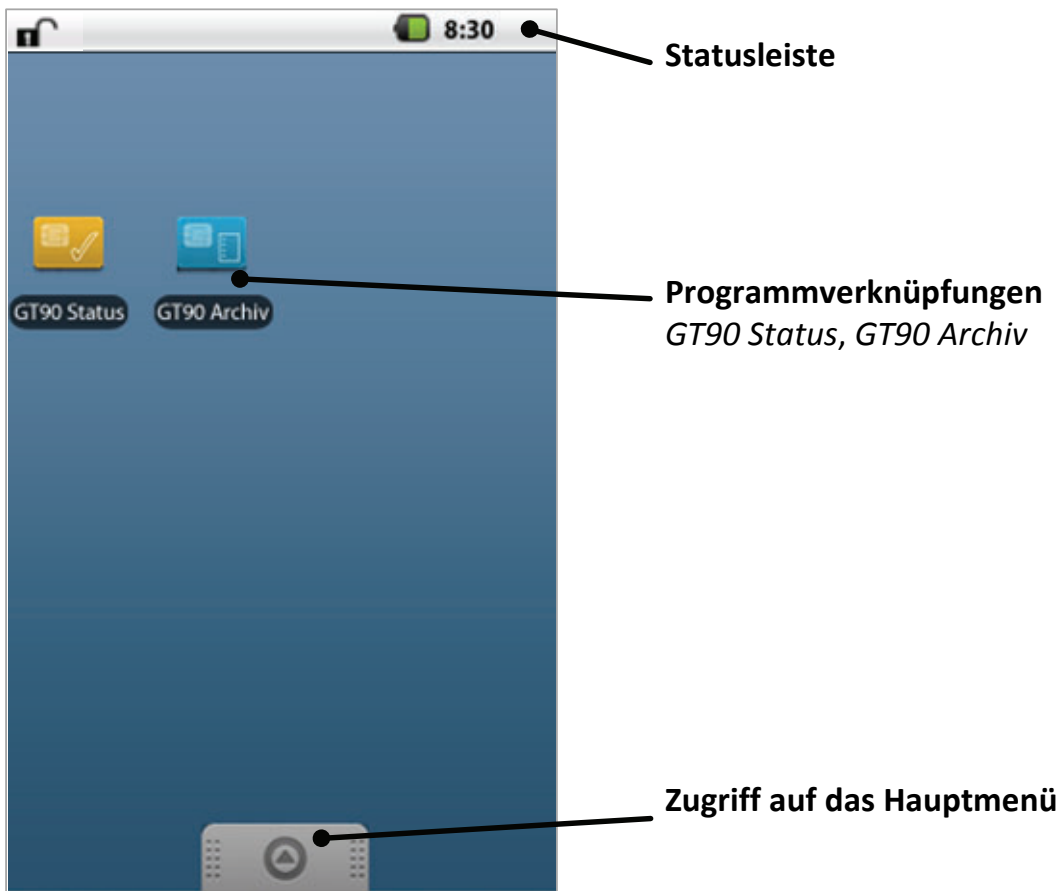

Multiscreen nutzen

Das GT90 **mobil** unterstützt die sogenannte Multiscreen-Funktion, d.h. sie können den Desktop über die physischen Bildschirmgrenzen hinaus nutzen.

- 1 Setzen Sie den Eingabestift oder Ihren Finger auf dem Hintergrund des Desktops ab.
- 2 Ziehen Sie den Eingabestift langsam nach rechts oder links.
- 3 Lassen Sie den Desktop los, sobald die Programmverknüpfungen nicht mehr zu sehen sind. Die Programmverknüpfungen befinden sich nun auf einem virtuellen Bildschirm.
- 4 Wenn Sie den aktuellen Desktop schließlich in die entgegengesetzte Richtung ziehen, können Sie die Programmverknüpfungen zurückholen.

Desktop personalisieren

Ihren Desktop können Sie mit verschiedenen Hintergrundbildern individuell gestalten.

- 1 Drücken Sie auf den Hintergrund Ihres Desktops für ungefähr drei Sekunden.
Ein Auswahlmenü öffnet sich.
- 2 Tippen Sie in dem Auswahlmenü auf die Option *Hintergrundbilder*.
Die Optionen *Bilder* und *Galerie* werden Ihnen angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf *Galerie*.
Verschiedene Hintergrundbilder werden Ihnen angezeigt.
- 4 Zur Auswahl eines Bildes bewegen Sie Ihren Finger nach rechts.
- 5 Tippen Sie auf *Hintergrund festlegen*, um das gewünschte Bild als Hintergrund festzulegen.
Ihr individueller Desktop wird Ihnen angezeigt.

Sie können Hintergrundbilder auch dazu verwenden, um eine Verwechslungsgefahr vorzubeugen, wenn z.B. in Ihrer Praxis mehr als ein GT90 **mobil** vorhanden ist.

Hauptmenü

Das Hauptmenü ist über den Desktop erreichbar. Sie finden alle Programme im Hauptmenü. Ziehen Sie den grauen Balken in Richtung der Statusleiste, um das Hauptmenü zu öffnen.

PROGRAMME



Programm öffnen

Tippen Sie auf das entsprechende Programmsymbol.


Programm schließen

Drücken Sie die Zurück-Taste.







Programmverknüpfung erstellen

- 1 Öffnen Sie das Hauptmenü.
- 2 Ziehen Sie das entsprechende Programmsymbol vom Hauptmenü auf den Desktop.
Die Programmverknüpfung ist nun auf Ihrem Desktop angelegt.








Programmverknüpfung löschen

- 1 Halten Sie die Programmverknüpfung auf dem Desktop für mehrere Sekunden gedrückt.
In der Leiste für den Zugriff auf das Hauptmenü erscheint der Papierkorb .
- 2 Ziehen Sie die Programmverknüpfung in den Papierkorb hinein.
Der Papierkorb blinkt rot und die Programmverknüpfung ist gelöscht.

Übersicht der Programme des GT90 **mobil**

Programmsymbol	Funktion
 GT90 Status	Patientendaten aufnehmen und im Archiv speichern
 GT90 Archiv	Patientenarchiv zur Verwaltung der Patientendaten
 GT90 Admin	GT90 mobil Einstellungsmenü
 Einstellungen	Sound und Display, Geräteinformationen anzeigen
 Wecker	Weckfunktion, Erinnerung an Termine
 Rechner	Addieren, Subtrahieren, Dividieren und noch mehr mathematische Funktionen

Übersicht der Symbole in der Statusleiste

Symbol	Bedeutung
	nicht abgesicherter Eingabemodus
	abgesicherter Eingabemodus
	Akkustatus
	Akku lädt
	aktive USB-Verbindung
	Weckfunktion ein
	keine Micro SD-Karte eingelegt

4.3 GT90 Status



Die auf den Chipkarten gespeicherten Patientendaten können Sie mit GT90 **mobil** automatisch oder über *GT90 Status* auslesen. Die Patientendaten werden in einem Archiv, dem Patientenarchiv, abgelegt. Beachten Sie, dass Sie höchstens 200 Patienten in dem Archiv aufnehmen können.


Chipkarte einlesen

PATIENTEN AUFNEHMEN

.....

1 Öffnen Sie *GT90 Status*.


Der Chipkartenleser ist einsatzbereit. Zum automatischen Auslesen der Chipkarte beginnen Sie einfach mit Schritt 2.

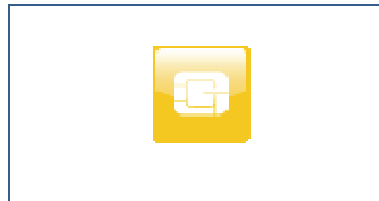

.....

2 Stecken Sie die Chipkarte hochkant (s. nebenstehende Abbildung) in den Kartenschlitz. Der Chip muss Ihnen zugewandt sein.


ACHTUNG! Führen Sie die Chipkarte gerade in den Kartenschlitz. Biegen oder knicken Sie die Chipkarte nicht.

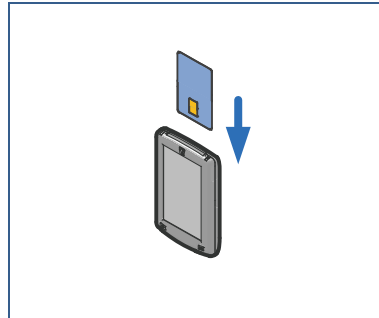

.....

3 Warten Sie einen Moment.


Die Patientendaten werden aufgenommen.

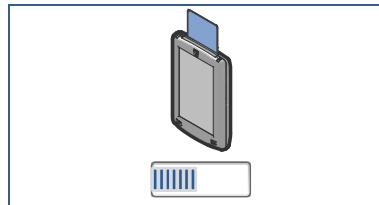

.....

4 Informationen zu den Patientendaten werden angezeigt.


1 Der Patient wurde erfolgreich im Archiv erfasst.
2 Das Archiv ist voll: Patient kann nicht aufgenommen werden.

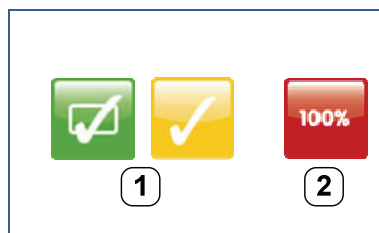

.....

5 Ziehen Sie die Chipkarte aus dem Kartenschlitz.

Zum Verlassen von *GT90 Status*, drücken Sie die Zurück-Taste.

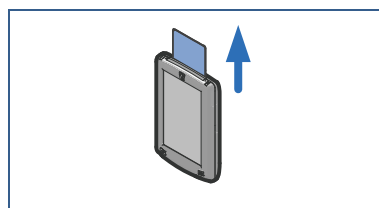

Mögliche Fehlermeldungen beim Einlesen einer Chipkarte:



Die Chipkarte des Patienten ist abgelaufen. Der Patient wurde dennoch im Archiv gespeichert.



Das Archiv ist voll. Sie können

einzelne Patienten aus dem Archiv löschen, s. Seite 33 f. oder

das Archiv mit Ihrem Informationssystem synchronisieren und das gesamte Patientenarchiv löschen, s. Seite 37.

um diesen Fehler zu beheben.



Lesefehler! Überprüfen Sie, ob die Karte richtig eingelegt ist und die Kartenkontakte nicht verschmutzt sind.

Möglicherweise handelt es sich bei der Chipkarte, die Sie versuchen einzulesen, um einen Typ, der nicht vom Chipkartenleser unterstützt wird. Stellen Sie sicher, dass Sie ausschließlich solche Chipkarten mit dem Gerät verwenden, welche für die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte durch die gematik GmbH vorgesehen sind.

4.4 GT90 Archiv

Aufgenommene Patientendaten können Sie mit dem Programm *GT90 Archiv* verwalten. Wenn Sie *GT90 Archiv* öffnen, wird Ihnen das Patientenarchiv angezeigt. Im Patientenarchiv wird jeder Patient mit dem Namen und dem Zeitpunkt der Erfassung aufgelistet.




Sie müssen sich beim Öffnen von *GT90 Archiv* immer mit Ihrer Benutzer-PIN anmelden.

Patientendaten lesen und drucken

1 Öffnen Sie *GT90 Archiv*.

Das Patientenarchiv wird Ihnen angezeigt

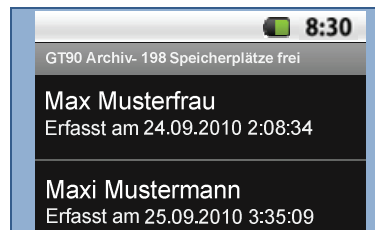

PATIENTENEINTRAG
LESEN

2 Tippen Sie auf den Namen Ihres Patienten.

Details über den Patienten werden Ihnen in einer Kartenansicht angezeigt.



3 Die detaillierte Kartenansicht wird angezeigt.


Zum Blättern in den Patientendaten, benutzen Sie den Rollbalken am rechten Rand. Scrollen Sie in der Patientenansicht nach unten, um weitere Optionen angezeigt zu bekommen, insbesondere den Button zum drucken der gerade angezeigten Patientendaten.



.....

4 Zum Drucken der Patientendaten, tippen Sie auf *Drucken*.


Der Button *Drucken* befindet sich am Ende der Kartenansicht. Um Patientendaten in ein Formular drucken zu können, muss ein ESC/P2 fähiger Drucker am USB-Port (Typ-A) des GT90 **mobil** direkt angeschlossen sein. Ist kein Drucker am USB Port des Gerätes angeschlossen und Sie betätigen den Button *Drucken*, wird eine Fehlermeldung „Drucker nicht angeschlossen“ ausgegeben.

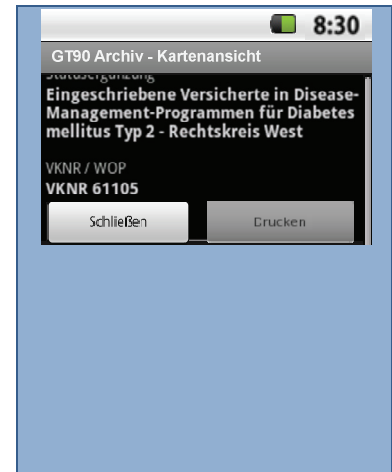

.....

5 Zum Verlassen der Kartenansicht, tippen Sie auf *Schließen*.

Ihnen wird dann das Patientenarchiv angezeigt.

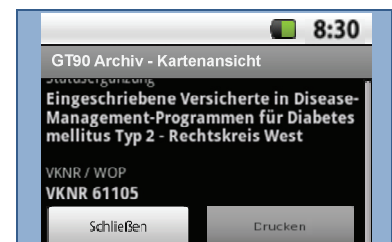

.....


Hinweis: Um Patientendaten drucken zu können, muss ein ESC/P2 fähiger Drucker direkt an den USB Port des GT90 **mobil** angeschlossen sein. Die Verwendung eines Adapterkabels (z.B. USB zu Parallel-Port) ist nicht möglich. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach kompatiblen Druckern.

Patientendaten löschen

PATIENTEN LÖSCHEN

1 Öffnen Sie **GT90 Archiv**.

Das Patientenarchiv wird Ihnen angezeigt.

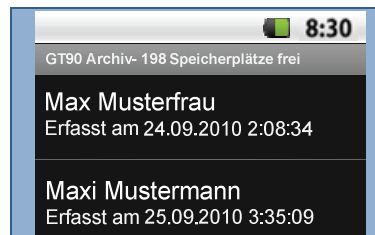

2 Drücken Sie auf den Namen des Patienten, um ihn zu löschen.

Eine Sicherheitsabfrage wird Ihnen angezeigt.



3 Tippen Sie auf **Löschen**, um das Löschen abzuschließen.

Ihnen wird dann das Patientenarchiv angezeigt.



GT90 Archiv Menü

Im **GT90 Archiv Menü** können Sie das Patientenarchiv konfigurieren, Einstellungen für das Programm *GT90 Archiv* vornehmen und den Chipkartenleser aus *GT90 Status* einstellen.

So erreichen Sie das **GT90 Archiv Menü**:

GT90 ARCHIV MENÜ


1 Öffnen Sie *GT90 Archiv*.

Das Patientenarchiv wird angezeigt.



2 Drücken Sie die Menütaste.

Das **GT90 Archiv Menü** erscheint im unteren Bereich des Displays.

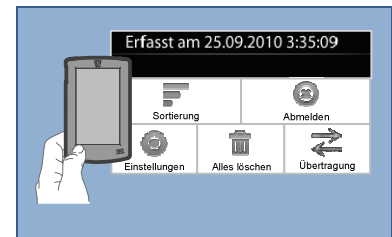

4 Im *GT90 Archiv Menü* haben Sie folgende Optionen:


- 1 Sie können das **Patientenarchiv** konfigurieren.
- 2 Sie können das **Programm *GT90 Archiv*** und **den Chipkartenleser** konfigurieren.



Patientenarchiv konfigurieren




Patientenarchiv sortieren

- 1 Im **GT90 Archiv Menü** tippen Sie auf  *Sortierung*. Die Sortierungsoptionen „Name auf-/absteigend“ und „Datum auf-/absteigend“ werden Ihnen in einer Liste angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf Ihre gewünschte Sortierung. Das Patientenarchiv wird Ihnen sortiert angezeigt.

Patientenarchiv löschen




DATENVERLUST! Synchronisieren Sie das GT90 **mobil** mit Ihrem Informationssystem bevor Sie das gesamte Patientenarchiv löschen.


- 1 Im **GT90 Archiv Menü** tippen Sie auf  *Alle löschen*. Ein Bestätigungsfenster wird Ihnen angezeigt.
- 2 Bestätigen Sie das Löschen des Patientenarchivs mit *Löschen*. Das Patientenarchiv wird gelöscht. Anschließend wird Ihnen das leere Patientenarchiv angezeigt.

GT90 Archiv beenden



- 1 Im **GT90 Archiv Menü** tippen Sie auf  *Abmelden*, um das *GT90 Archiv* zu beenden.

Konfiguration des Chipkartenlesers und GT90 Archiv

Im **GT90 Archiv Menü** haben Sie außerdem die Option  *Einstellungen*. Dort können Sie den Chipkarteleser konfigurieren sowie Ihre Benutzer-PIN ändern und das Übertragungsformat für die Synchronisierung festlegen.




So erreichen Sie das **Einstellungsmenü**:

EINSTELLUNGSMENÜ


- 1 **Öffnen Sie GT90 Archiv Menü.**

Das **GT90 Archiv Menü** wird Ihnen angezeigt.

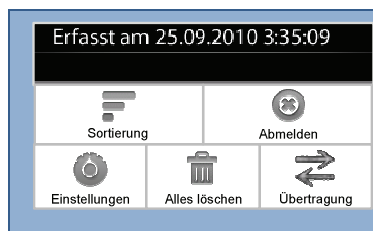

- 2 **Tippen Sie auf  *Einstellungen*.**


Das Einstellungsmenü für *GT90 Archiv* und *GT90 Status* wird geöffnet.

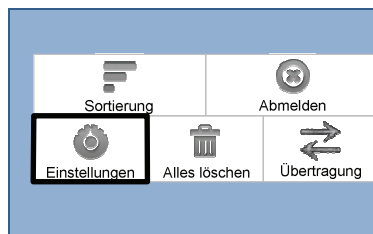

3 Die Optionen des Einstellungsmenüs werden angezeigt.

In diesem Menü können Sie:

- 1 die Benutzer-PIN ändern,
- 2 das Übertragungsformat festlegen,
- 3 den Betriebsmodus einstellen,
- 4 die Arztnummer eingeben,
- 5 die Betriebsstätten-Nummer festlegen,
- 6 die automatische Kartenanzeige einschalten,
- 7 den Status automatisch ein-/ausblenden lassen,
- 8 das Drucken des Datums veranlassen.

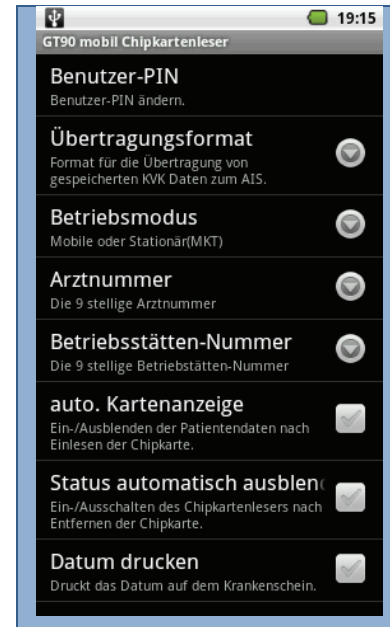


Benutzer-PIN ändern

BENUTZER-PIN

- 1 Tippen Sie auf *Benutzer-PIN*.
Sie werden aufgefordert, die aktuelle Benutzer-PIN über die angezeigte Nummern-Tastatur einzugeben.
- 2 Geben Sie die aktuelle Benutzer-PIN ein und tippen Sie auf *Ok*.
Sie werden aufgefordert, eine neue Benutzer-PIN zu vergeben.
- 3 Geben Sie eine neue Benutzer-PIN über die Nummern-Tastatur ein und tippen Sie auf *Ok*.
Sie werden aufgefordert, Ihre Eingabe zu wiederholen.
- 4 Geben Sie Ihre neue Benutzer-PIN erneut ein und tippen Sie auf *Ok*.
Die Benutzer-PIN wurde erfolgreich vergeben. Ihnen wird nun das Patientenarchiv angezeigt.

Übertragungsformat für Patientendaten festlegen

ÜBERTRAGUNGS- FORMAT

- 1 Tippen Sie auf *Übertragungsformat*.
Ihnen werden ASN.1 und Festformat zur Auswahl angezeigt.
- 2 Um ein Übertragungsformat festzulegen, tippen Sie auf .


Betriebsmodus einstellen

- 1 Zum Ändern des Betriebsmodus des Chipkartenterminlas, tippen Sie auf *Betriebsmodus*.

Sie können zwischen den Betriebsarten:

- Mobil und
- Stationär (MKT)

wählen. Bitte beachten Sie, dass das Gerät permanent mit einem Computer verbunden sein muss, um als Stationäres Terminal zu funktionieren.

- 2 Um einen Betriebsmodus festzulegen, tippen Sie auf .

BETRIEBSMODUS
EINSTELLEN

Arztnummer (LANR) einstellen

- 1 Um die Arztnummer bei einem Ausdruck eines Formulars auszugeben, können Sie sie an dieser Stelle permanent im Gerät speichern. Tippen Sie dazu auf *Arztnummer* und geben Sie die entsprechende Nummer ein.
- 2 Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf den *OK* Button.

ARZTNUMMER
EINSTELLEN

Betriebsstätten-Nummer (BSNR) einstellen

- 1 Um die Betriebsstätten-Nummer bei einem Ausdruck eines Formulars auszugeben, können Sie sie an dieser Stelle permanent im Gerät speichern. Tippen Sie dazu auf *Betriebsstätten-Nummer* und geben Sie die entsprechende Nummer ein.
- 2 Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf den *OK* Button.

BETRIEBSTÄTTEN-
NUMMER
EINSTELLEN

Patientendaten nach dem Einlesen der Chipkarte direkt anzeigen

- 1 Zum Ein-/Ausblenden der Patientendaten direkt nach dem Einlesen, tippen Sie auf *automat. Kartenanzeige*.



: Patientendaten werden nach dem Einlesen der Chipkarte angezeigt.



: Patientendaten werden nicht angezeigt.

PATIENTENDATEN
ANZEIGE

Status des Chipkartenlesers nach Entfernen der Chipkarte

CHIPKARTENLESER- STATUS ÄNDERN

- 1 Zum Ein-/Ausschalten des Chipkartenlesers nach Entfernen der Chipkarte, tippen Sie auf *Status automatisch ausblenden*.



: Nach Entfernen der Chipkarte wird *GT90 Status* automatisch beendet.



: Nach Entfernen der Chipkarte können weitere Chipkarten eingelesen werden.

Datum drucken

DATUM DRUCKEN

- 1 Um das Datum bei einem Ausdruck eines Formulars auszugeben, können Sie dies an dieser Stelle optional auswählen. Tippen Sie auf *Datum drucken*.



: Beim Drucken eines Formulars wird das Datum ausgegeben.



: Beim Drucken eines Formulars wird das Datum nicht ausgegeben.

Einstellungsmenü verlassen

- 1 Zum Verlassen des Einstellungsmenüs, drücken Sie die Zurück-Taste.

GT90 **mobil** mit Ihrem AIS synchronisieren

SYNCHRONISIEREN

Durch das Synchronisieren Ihres GT90 **mobil** mit Ihrem Informationssystem (AIS⁴, KIS⁵ oder ZIS⁶) wird sichergestellt, dass alle auf dem GT90 **mobil** gespeicherten Patientendaten automatisch an Ihr Informationssystem übertragen werden und Ihr Informationssystem aktualisiert wird.

Standardmäßig können Sie die Synchronisierung starten, sobald Sie das GT90 **mobil** mit Ihrem Computer über das USB-Kabel verbunden haben. Die Synchronisierung wird von Ihrem Informationssystem durchgeführt. Informieren Sie sich bitte im Benutzerhandbuch Ihres Informationssystems über die Durchführung der Synchronisierung.

⁴ Arztinformationssystem

⁵ Krankenhausinformationssystem

⁶ Zahnarztinformationssystem.

4.5 GT90 Admin



Mit dem Programm *GT90 Admin* können Sie vor allem Einstellungen vornehmen, die für eine den Sicherheitsanforderungen entsprechende Nutzung wichtig sind. Wenn Sie *GT90 Admin* öffnen, wird Ihnen ein Menü mit folgenden Optionen angezeigt:



Geräteinformationen

Datum und Zeit
einstellen

Firmware aktualisieren

Benutzer-PIN ändern

Admin-PIN ändern

Auslieferungszustand
wiederherstellen



Die mit einem Schloss markierten Menüpunkte können nur durch Eingabe der Admin-PIN genutzt werden.




Aus Sicherheitsgründen wird der Zugriff auf die administrativen Einstellungen über die ADMIN-PIN geschützt.

FW-Version, Serien- und Zulassungsnummer anzeigen

- 1 Tippen Sie im *GT90 Admin* Menü auf *Info*.

Die Seriennummer, die aktuelle Firmware-Version und die Zulassungsnummer des GT90 **mobil** werden Ihnen angezeigt.

FW-INFO

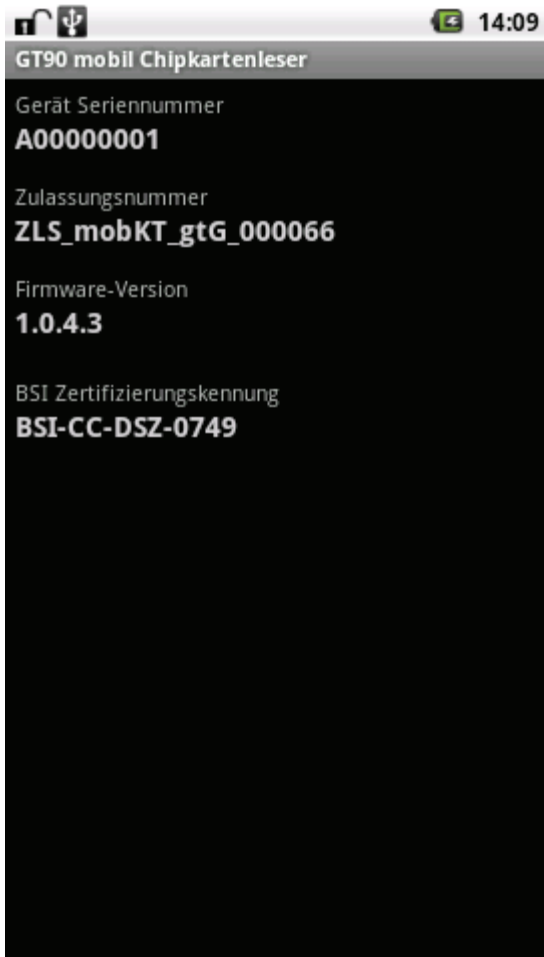

Ihnen werden die Geräte-Seriennummer, die Zulassungsnummer, die Firmware-Version und die Zertifizierungskennung des BSI angezeigt. Dies sind auch die Angaben, die für die Zertifizierung Ihres Chipkartenterminals relevant sind.

Datum und Zeit einstellen



Datum und Zeit können nur geändert werden, wenn das Patientenarchiv keine Einträge enthält. Synchronisieren Sie ggf. das Patientenarchiv mit Ihrem Informationssystem.

DATUM UND UHRZEIT

- 1 Tippen Sie im *GT90 Admin* Menü auf *Datum und Uhrzeit*.
Nach Eingabe der Admin-PIN wird Ihnen das Einstellungsmenü für Datum und Uhrzeit angezeigt.
- 2 Im Einstellungsmenü für *Datum und Uhrzeit* haben Sie folgende Optionen:

Datum einstellen

- 1 Tippen Sie auf *Datum festlegen*.
Ein Dialogfenster zur Einstellung des Tags, Monats und Jahres wird Ihnen angezeigt.
- 2 Geben Sie über das Dialogfenster das aktuelle Datum ein.

Zeit einstellen

- 1 Tippen Sie auf *Uhrzeit festlegen*.
Ein Dialogfenster zur Einstellung der Stunden und Minuten wird Ihnen angezeigt.
- 2 Geben Sie über das Dialogfenster die aktuelle Uhrzeit ein.

Zeitzone ändern

- 1 Tippen Sie auf *Zeitzone auswählen*.
Eine Liste von Städten/Zeitzone wird Ihnen angezeigt.
- 2 Wählen Sie die aktuelle Zeitzone aus.
Hinweis: Für Deutschland gilt die mitteleuropäische Zeit, d.h. Deutschland liegt in der Zeitzone *UTC (GMT) +1*.

Zeitformat ändern

- 1 Für die Auswahl eines Zeitformats, tippen Sie auf *24-Stunden-Format*.



: 24h-Format



: 12h-Format

Datumsformat ändern

- 1 Tippen Sie auf Datumsformat auswählen.
Eine Liste mit unterschiedlichen Formaten wird Ihnen angezeigt.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Format aus.

Vorbereiten eines Firmware-Updates



Das Gerät wird ohne Micro SD-Karte ausgeliefert. Für ein erfolgreiches Firmware-Update benötigen Sie jedoch eine SD-Karte. Achten Sie darauf, dass Sie zu Beginn des Firmware-Updates eine Micro SD-Karte einlegen.




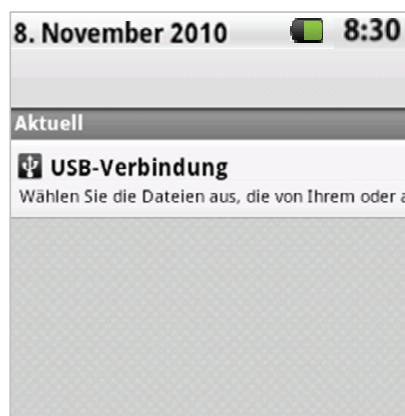
Die Firmware kann nur aktualisiert werden, wenn das Patientenarchiv keine Einträge enthält. Synchronisieren Sie ggf. das Patientenarchiv mit Ihrem Informationssystem.

Dateien von Ihrem Computer auf das GT90 mobil übertragen

FIRMWAREDATEI ÜBERTRAGEN

Um ein Firmware-Update erfolgreich durchführen zu können, müssen Sie zunächst die neue Firmware-Datei auf die eingelegte Micro SD-Karte Ihres GT90 **mobil** kopieren. Wenn Sie das Chipkartenlesegerät über ein USB-Kabel an Ihren Computer anschließen, kann es von Ihrem Computer als externes Laufwerk erkannt werden. Dadurch können Sie Daten von Ihrem Computer auf das GT90 **mobil** übertragen. Die Dateien werden hierbei auf der SD-Karte des Gerätes gespeichert. Versichern Sie sich daher, dass bei Beginn eine SD-Karte eingelegt ist.

- 1 Verbinden Sie das GT90 **mobil** über das USB-Kabel mit Ihrem Computer.
Das Symbol  erscheint in der Statusleiste.
- 2 Drücken Sie auf die Menü-Taste und klicken Sie auf *Benachrichtigungen*.
- 3 Das Benachrichtigungsfenster wird geöffnet.



- 4 Im Benachrichtigungsfenster tippen Sie auf *USB-Verbindung*. Im sich öffnenden Dialogfenster werden Sie gefragt, ob Sie Daten zwischen Ihrem Computer und dem GT90 **mobil** austauschen möchten.
- 5 Bestätigen Sie die Abfrage durch Tippen auf *Bereitstellen*.

Ihr GT90 **mobil** wird nun von Ihrem Computer als externes Laufwerk verwendet.

Wie Sie Ihr GT90 **mobil** als externes Laufwerk nutzen:

- 1 Öffnen Sie einen Datei-Explorer auf Ihrem Computer.
- 2 Das GT90 **mobil** wird Ihnen im Explorer als externes Laufwerk angezeigt.
- 3 Kopieren Sie die gewünschten Dateien auf das angezeigte Laufwerk.
Die Dateien werden auf der SD-Karte des GT90 **mobil** gespeichert.

Wenn Sie die benötigten Dateien kopiert haben, deaktivieren Sie die USB-Verbindung wie folgt:

- 1 Öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster auf Ihrem GT90 **mobil**.
- 2 Tippen Sie im Benachrichtigungsfenster auf USB-Speicher deaktivieren.
- 3 Bestätigen Sie die Abfrage durch Tippen auf Ausschalten.

Die Dateien sind nun sicher auf der SD-Karte gespeichert und Sie können das GT90 **mobil** von Ihrem Computer trennen.

Wichtige Informationen über das Firmware-Update

Neue und zertifizierte Versionen der Firmware finden Sie auf der Herstellerseite <http://www.germantelematics.de>. Laden Sie immer die aktuellste Firmware-Version (Dateiname: gt90_*.bin) herunter.

Überprüfen Sie vor dem Firmware-Update, ob die neue Firmware für das GT90 **mobil** von der Gematik GmbH und gegebenenfalls vom BSI zertifiziert wurde. Informationen über den Stand der Zertifizierung erhalten Sie auf den Webseiten

- des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) unter <http://www.bsi.bund.de>

INFO FIRMWARE
UPDATE

- und der Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte GmbH (gematik) unter <http://www.gematik.de>

Durchführung eines Firmware-Updates



Installieren Sie nur Firmware-Versionen auf Ihrem GT90 **mobil**, die von der gematik GmbH und ggf. vom BSI zertifiziert wurden.



Durch die Installation einer neuen Firmware kann dieses Benutzerhandbuch seine Gültigkeit verlieren. Informieren Sie sich auf der Herstellerseite <http://www.germantelematics.de> über die aktuellste Version des Benutzerhandbuches.

Beachten Sie bitte folgende Vorschriften, wenn Sie die Firmware aktualisieren:

- Nur autorisierte Personen, wie z.B. Administratoren, dürfen ein Firmware-Update durchführen.
- Das Firmware-Update muss in einer gesicherten Umgebung durchgeführt werden.

1. Firmware-Datei auf GT90 mobil kopieren

FIRMWARE-UPDATE


- 1 Verbinden Sie das GT90 **mobil** über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- 2 Kopieren Sie aktuellste Firmware-Version (gt90_*.bin) auf das GT90 **mobil**. Legen Sie die Datei in dem Hauptverzeichnis ab.

Hinweis: Wie Sie Dateien auf das GT90 **mobil** kopieren, können Sie ab Seite 46 nachlesen.

- 3 Trennen Sie das GT90 **mobil** sicher von Ihrem Computer und starten Sie das Firmware-Update.

2. Firmware-Update starten

- 1 Tippen Sie im *GT90 Admin* Menü auf *Firmware aktualisieren*.
Nach einer erfolgreichen Eingabe der Admin-PIN wird Ihnen eine Liste mit den auf der SD-Karte gefundenen Update-Dateien angezeigt.

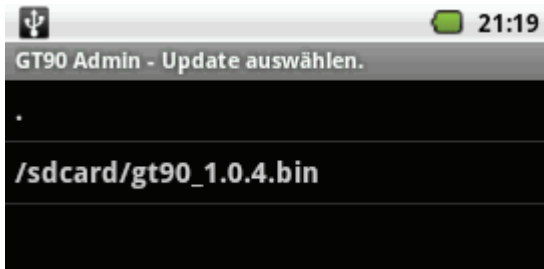

Wählen Sie die gewünschte Update-Datei durch einen Klick auf diese aus.



Sie werden nun gefragt, ob Sie das Update mit der soeben ausgewählten Datei durchführen wollen.

- 2 Bestätigen Sie die Abfrage mit *Update starten*.
- 3 Das Firmware-Update wird gestartet. Das Update kann einige Minuten dauern. Das Gerät startet dafür in einen gesonderten Betriebsmodus (siehe [Abbildung 3](#)). Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nach einem erfolgreichen Firmware-Update erfolgt automatisch ein Neustart des GT90 **mobil**.

Hinweis: Das Update kann zum Teil sehr lange dauern. Schalten Sie das Gerät nicht aus und unterbrechen Sie auch die Stromversorgung nicht.

```
Kopiere /sdcard/gt90_1.0.4.bin erfolgreich
Verifiziere Update...erfolgreich
Update gestartet. Bitte Warten.
Update war erfolgreich.
System wird nun neu gestartet.
Zurück Taste für Neustart drücken
-
```

Während des Firmware-Updates befindet sich das Gerät in einem gesonderten Modus und benachrichtigt über den Updateverlauf.

Abbildung 3: Durchführung eines Firmware-Updates

3. Inbetriebnahme des GT90 mobil nach Firmware-Update

Nachdem die Firmware erfolgreich aktualisiert wurde, müssen Sie die Admin- und Benutzer-PIN erneut festlegen. Ihre Einstellungen für Datum und Zeit werden bei dem Firmware-Update **nicht** zurückgesetzt.

- 1 Öffnen Sie *GT90 Admin*.
Der *GT90 Setup Wizard* wird gestartet und begleitet Sie bei der PIN-Vergabe.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen des *GT90 Setup Wizard*.
Die Anweisungen werden Ihnen auf dem Display angezeigt.
- 3 Sobald Sie die Admin- und Benutzer-PIN erfolgreich vergeben haben, ist das Firmware-Update beendet.

Benutzer-PIN nach Verlust zurücksetzen



In *GT90 Admin* kann die Benutzer-PIN nur zurückgesetzt werden, wenn das Patientenarchiv keine Einträge enthält. Synchronisieren Sie ggf. das Patientenarchiv mit Ihrem Informationssystem.

BENUTZER-PIN
VERLOREN



Falls Sie die aktuelle Benutzer-PIN zur Hand haben, können Sie diese unter **GT90 Archiv Menü** >Einstellungen>Benutzer-PIN ändern.

- 1 Tippen Sie im *GT90 Admin* Menü auf *Benutzer-PIN*.
Nach Eingabe der Admin-PIN werden Sie aufgefordert, eine neue Benutzer-PIN festzulegen.
- 2 Geben Sie eine neue Benutzer-PIN über die Nummern-Tastatur ein und tippen Sie auf *Ok*.
Sie werden aufgefordert, Ihre Eingabe zu wiederholen.
- 3 Geben Sie Ihre neue Benutzer-PIN erneut ein und tippen Sie auf *Ok*.
Die neue Benutzer-PIN wurde erfolgreich vergeben. Ihnen wird das *GT90 Admin* - Menü angezeigt.

Admin-PIN ändern

- 1 Tippen Sie im *GT90 Admin* Menü auf *Neue Admin-PIN*.
Nach Eingabe der aktuellen Admin-PIN werden Sie aufgefordert, eine neue Admin-PIN festzulegen.
- 2 Geben Sie über die Nummern-Tastatur die neue Admin-PIN ein und tippen Sie auf *Ok*.
Sie werden aufgefordert, Ihre Eingabe zu wiederholen.
- 3 Geben Sie Ihre neue Admin-PIN erneut ein und tippen Sie auf *Ok*.
Die neue Admin-PIN wurde erfolgreich vergeben. Ihnen wird das *GT90 Admin* Menü angezeigt.

ADMIN-PIN ÄNDERN


Werkseinstellungen zurücksetzen



Die Werkseinstellungen können nur zurückgesetzt werden, wenn das Patientenarchiv keine Einträge enthält. Synchronisieren Sie ggf. das Patientenarchiv mit Ihrem Informationssystem.



Um die Werkseinstellungen zurücksetzen zu können, benötigen Sie Ihre Admin-PIN. Sollten Sie die Admin-PIN verloren haben, wenden Sie sich an Ihren Händler oder ggf. direkt an den Hersteller, um die PUK zu erfahren (PUK, engl.: Pin Unlocking Key). Die PUK ist eine Super-PIN, mit der Ihr Gerät ohne die Eingabe der Admin-PIN in den Auslieferungszustand versetzt werden kann.

- 1 Tippen Sie im *GT90 Admin* Menü auf *Werkreset*.
Das Dialogfenster zur Eingabe der Admin-PIN öffnet sich.
Sie haben die Admin-PIN zur Hand:
 - Geben Sie Ihre Admin-PIN ein.Falls Sie die Admin-PIN vergessen haben:
 - Drücken Sie die Menü-Taste
 - Tippen Sie in dem Dialogfenster auf  *Admin-PIN vergessen*.
Ein Dialogfenster zur Eingabe der PUK wird geöffnet.
 - Geben Sie die PUK ein.
- 2 Die Werkseinstellungen werden zurückgesetzt.
Beachten Sie die Hinweise auf dem Display.
- 3 Nachdem die Werkseinstellungen erfolgreich zurückgesetzt wurden, warten Sie bis das Gerät neu startet oder drücken Sie die Zurück-Taste, um das Gerät neu zu starten.

4.6 Einstellungen



Unter „Einstellungen“ können Sie das Gerät konfigurieren. Sie können u.a. den Touchscreen konfigurieren, die Lautstärke regulieren und sich Informationen über das GT90 **mobil** anzeigen lassen.

Sound und Display

SOUND UND DISPLAY

Lautstärke einstellen:

- 1 Öffnen Sie Einstellungen.
- 2 Tippen Sie auf *Sound & Display*.
- 3 Tippen Sie auf *Medienlautstärke*:
 - Laut: Ziehen Sie den grauen Balken nach rechts.
 - Leise: Ziehen Sie den grauen Balken nach links.

Bildschirmgeräusche ein-/ausschalten:

- 1 Öffnen Sie Einstellungen.
- 2 Tippen Sie auf *Sound & Display*.
- 3 Tippen Sie auf *Akustische Auswahl*.
 - : Bildschirmgeräusche ein
 - : Bildschirmgeräusche aus

Helligkeit des Bildschirms einstellen:

- 1 Öffnen Sie Einstellungen.
- 2 Tippen Sie auf *Sound & Display*.
- 3 Tippen Sie auf *Helligkeit*:
 - Hell: Ziehen Sie den grauen Balken nach rechts.
 - Dunkel: Ziehen Sie den grauen Balken nach links.

Standby-Modus einstellen:

- 1 Öffnen Sie Einstellungen.
- 2 Tippen Sie auf *Sound & Display*.
- 3 Tippen Sie auf *Display-Timeout*:
 - Tippen Sie auf den Zeitraum, für den das Gerät eingeschaltet bleibt.

Bildschirm Ansicht einstellen:

- 1 Öffnen Sie Einstellungen.
- 2 Tippen Sie auf *Ausrichtung* und wählen Sie die gewünschte Bildschirmansicht.
 - 90° : Standard-Einstellung (empfohlen)
 - 180°: Standard-Einstellung um 90° nach links gedreht
 - 270°: Standard-Einstellung horizontal gespiegelt
 - 0°: Standard-Einstellung um 90° nach rechts gedreht

Geräteinformationen

GT90 MOBIL INFO

Geräteinformationen über *Einstellungen* anzeigen.

Modellnummer, Version des Betriebssystems Android, Kernel-Version und Build-Nummer

- 1 Öffnen Sie *Einstellungen*.
- 2 Tippen Sie auf *Geräteinfo*
 - Obige Informationen werden in der Liste angezeigt.



Anzeige der Geräteinformationen im Einstellungsmenü von Android. Bitte beachten Sie, dass Ihnen hier nicht die Zulassungsrelevanten Informationen Ihres Chipkartenlesegerätes angezeigt werden. Lesen Sie hierzu Abschnitt 4.5 „FW-Version, Serien- und Zulassungsnummer“.

Hinweis: In der Liste der angezeigten Informationen wird die Version des Betriebssystems Android unter *Firmware-Version* aufgeführt. Verwechseln Sie diese Angabe bitte nicht mit der Version der GT90 Firmware (GT90 Admin, GT90 Archiv und GT90 Status). Diese können Sie im Menüpunkt Info unter GT90 Admin einsehen (siehe Abschnitt GT90 Admin „FW-Version, Serien- und Zulassungsnummer anzeigen“ auf Seite 43)

Rechtliche Hinweise anzeigen

- 1 Öffnen Sie *Einstellungen*.
- 2 Tippen Sie auf *Geräteinfo*.
- 3 Tippen Sie auf *Rechtliche Hinweise*.
- 4 Tippen Sie auf *Open Source-Lizenzen*, um die Lizenzen zu laden.

Akkustatus anzeigen

- 1 Öffnen Sie *Einstellungen*.
- 2 Tippen Sie auf *Geräteinfo*.
- 3 Tippen Sie auf *Status*.
 - Akkustatus: Laden/Entladen
 - Akkuladung: aktuelle Ladung des Akkus

Sprache und Tastatur

Sprache wählen

In diesem Menü können Sie die Sprache des Betriebssystems wählen. Bitte beachten Sie, dass dies keine Auswirkung auf die Sprache der Kartenleserapplikation (GT90 Admin, GT90 Archiv und GT90 Status) hat.

- 1 Öffnen Sie *Einstellungen*.
- 2 Tippen Sie auf *Sprache und Tastatur*.
- 3 Tippen Sie auf *Sprache wählen*.
- 4 Tippen Sie auf *Deutsch*, um Betriebssysteminformationen und Einstellungen in deutscher Sprache anzuzeigen, oder
- 5 Tippen Sie auf *English*, um Betriebssysteminformationen und Einstellungen in deutscher Sprache anzuzeigen, oder

Vibrieren bei Tastendruck:

Bitte beachten Sie, dass das GT90 mobil derzeit über keinen Vibrationsmotor verfügt. Der Menüpunkt *Vibrieren bei Tastendruck* ist somit funktionslos.

- 1 Öffnen Sie *Einstellungen*.
- 2 Tippen Sie auf *Sprache und Tastatur*.
- 3 Tippen Sie auf *Android-Tastatur*.



: Vibrieren bei Tastendruck ein
{funktionslos in der Hardware Version 1.1.0}



: Vibrieren bei Tastendruck aus

Sound bei Tastendruck:

- 1 Öffnen Sie *Einstellungen*.
- 2 Tippen Sie auf *Sprache und Tastatur*.
- 3 Tippen Sie auf *Android-Tastatur*.



: Sound bei Tastendruck ein



: Sound bei Tastendruck aus

Autom. Groß-/Kleinschreibung:

- 1 Öffnen Sie *Einstellungen*.
- 2 Tippen Sie auf *Sprache und Tastatur*.
- 3 Tippen Sie auf *Android-Tastatur*.



: Autom. Groß-/Kleinschreibung ein



: Autom. Groß-/Kleinschreibung aus

Vorschläge anzeigen:

Vorgeschlagene Wörter während des Tippens anzeigen:

- 1 Öffnen Sie *Einstellungen*.
- 2 Tippen Sie auf *Sprache und Tastatur*.
- 3 Tippen Sie auf *Android-Tastatur*.



: Vorschläge anzeigen ein



: Vorschläge anzeigen aus

Autom. vervollständigen:

Leertaste und Interpunktion fügen automatisch ein markiertes Wort ein:

- 1 Öffnen Sie *Einstellungen*.
- 2 Tippen Sie auf *Sprache und Tastatur*.
- 3 Tippen Sie auf *Android-Tastatur*.



: Autom. vervollständigen ein



: Autom. vervollständigen aus

Wörterbuch des Nutzers

In diesem Menü können Sie ein Wörterbuch anlegen. Das Wörterbuch ist im Auslieferungszustand Ihres mobilen Chipkartenlesegerätes leer.

- 1 Öffnen Sie *Einstellungen*.
- 2 Tippen Sie auf *Sprache und Tastatur*.
- 3 Tippen Sie auf *Wörterbuch des Nutzers*.
- 4 Drücken Sie die Menü-Taste und anschließend *Hinzufügen* um dem Wörterbuch ein neues Wort hinzuzufügen.

Wenn Sie bereits ein Wörterbuch erstellt haben:

- 1 Öffnen Sie *Einstellungen*.
- 2 Tippen Sie auf *Sprache und Tastatur*.
- 3 Tippen Sie auf *Wörterbuch des Nutzers*.
- 4 Tippen Sie auf eines der von Ihnen hinzugefügten Wörter
- 5 Wählen Sie *Bearbeiten* um dieses Wort zu Ändern, oder
- 6 wählen Sie *Löschen* um das Wort aus dem Wörterbuch zu entfernen.

Datum und Uhrzeit

Der Menüpunkt *Datum und Uhrzeit* ist identisch mit dem gleichnamigen Menüpunkt in GT90 Admin. Bitte lesen Sie hierzu Abschnitt *Datum und Zeit einstellen* auf Seite 44.



4.7 Wecker

Verwenden Sie das GT90 **mobil** als Wecker. Mit dem Wecker können Sie beliebig viele Weckrufe einstellen.

Wecker öffnen:

Öffnen Sie das Hauptmenü und berühren Sie anschließend *Wecker*.

Wenn Sie den Wecker zum ersten Mal öffnen, sind drei Weckrufe bereits standardmäßig eingerichtet. Diese können von Ihnen benutzerdefiniert werden. Alle drei Wecker sind standardmäßig deaktiviert.

Einstellen eines Weckers:

- 1 Berühren Sie einen Standardwecker.
- 2 Tippen Sie *Uhrzeit* an, um die Zeit für den Wecker festzulegen. Passen Sie die Zeit an, indem Sie + oder - berühren. Tippen Sie *Einstellen* an, wenn Sie damit fertig sind.
- 3 Tippen Sie *Klingelton* an und wählen Sie anschließend den Klingelton für den Wecker aus. Der Klingelton wird kurz nach der Auswahl abgespielt. . Tippen Sie *OK* an, wenn Sie damit fertig sind.
- 4 Tippen Sie *Wiederholen* an, um die Tage auszuwählen, an denen der Wecker ausgelöst werden soll. Berühren Sie anschließend *OK*.
- 5 Tippen Sie *Etikett* an, um dem Wecker einen Namen zu geben.
- 6 Drücken Sie auf *Fertig*, um zum Wecker-Fenster zurückzukehren.

Aktivieren oder Deaktivieren eines Weckers:

- 1 Setzen oder entfernen Sie das Häkchen im Wecker-Fenster hinter dem Wecker den Sie aktivieren oder deaktivieren möchten.

Weckruf löschen:

- 1 Berühren Sie im Wecker-Fenster den Weckruf, den Sie löschen möchten für ungefähr 2 Sekunden.
- 2 Drücken Sie in dem erscheinenden Fenster auf Wecker löschen.

4.8 Taschenrechner



Verwenden Sie das GT90 **mobil** als Taschenrechner.

Öffnen Sie das Hauptmenü und berühren Sie anschließend *Rechner*.

Es wird Ihnen nun die Eingabemaske eines Standard Taschenrechners angezeigt, den Sie wie gewohnt benutzen können.



Erweiterte Funktionen:

- 1 Drücken Sie die Menütaste Ihres GT90 **mobil**.
- 2 Tippen Sie auf *Erweiterte Funktionen* in der Menüleiste, um weitere Rechenoperationen anzuzeigen.

Verlauf löschen:

- 1 Drücken Sie die Menütaste Ihres GT90 **mobil**.
- 2 Tippen Sie auf *Verlauf löschen* in der Menüleiste, um den bisherigen Berechnungsverlauf zu löschen.

5. PROBLEMBEHEBUNG

Fehlerbeschreibung	Ursache	Behebung
Nach einem Neustart oder während des Betriebs wird die Meldung Systemfehler angezeigt.	Auf Ihr Gerät könnte ein hardwareseitiger Angriff vorgenommen worden sein. Dies stellt eine direkte Bedrohung der mit diesem Gerät zu verarbeitenden Daten dar. Eine Sicherheitsfunktion hat dies erkannt und informiert Sie darüber.	Kontaktieren Sie den Hersteller. Geben Sie die Fehlerbeschreibung an, und erbitten Sie weitere Hilfe.
Nach Eingabe der Admin-PIN oder Benutzer-PIN erfolgt keine Authentifizierung/Anmeldung.	Sie haben die PIN 3-mal falsch eingegeben.	Warten Sie eine gewisse Zeit. Danach ist der Administrator-Modus wieder freigeschaltet. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige PIN verwenden. Lesen Sie hierzu auch Kapitel 4.1 „Authentifizierung“ und beachten Sie bitte Tabelle 1: Sperrzeiten bei falscher PIN-Eingabe“.
Das Firmware-Update wird abgebrochen.	Die Firmware, die Sie zu installieren versuchen, passt nicht mit der auf dem Gerät hinterlegten Signatur-Datei zusammen.	Kontaktieren Sie den Hersteller.
	Sie versuchen eine Firmware zu installieren, die älter ist als die Firmware, die sich auf dem Chipkartenlesegerät befindet.	Die Installation der von Ihnen beabsichtigten FW ist nicht möglich. Sollten Sie Probleme mit einer neueren FW-Version haben und wollen daher auf die ältere FW-Version wechseln, so kontaktieren Sie bitte den Hersteller für weitere Unterstützung.
Meldung: Lesefehler! 	Die Chipkarte kann nicht gelesen werden.	Überprüfen Sie, dass die Karte richtig eingelegt ist und die Kartenkontakte nicht verschmutzt sind. Die Karte ist defekt oder es handelt sich um ein nicht unterstütztes Kartenformat.
Meldung: Das Patientenarchiv ist voll 	Spezifikationsgemäß dürfen maximal 200 Patienten im Archiv erfasst werden.	Synchronisieren oder löschen Sie Patientendaten aus dem Patientenarchiv.

Fehlerbeschreibung	Ursache	Behebung
<p>Meldung: Die Benutzer-PIN kann nicht geändert werden, da das Patientenarchiv noch Einträge enthält.</p> <p>Meldung: Die Firmware kann nicht aktualisiert werden, da das Patientenarchiv noch Einträge enthält.</p> <p>Meldung: Das Datum kann nicht geändert werden, da das Patientenarchiv noch Einträge enthält.</p>	<p>Aus Sicherheitsgründen kann diese Aktion nur bei leerem Patientenarchiv durchgeführt werden.</p>	<p>Synchronisieren Sie das Patientenarchiv mit Ihrem Informationssystem oder löschen Sie manuell das gesamte Patientenarchiv.</p>
<p>Meldung: Für eine Synchronisation mit Ihrem Informationssystem müssen Sie mit der Benutzer-PIN angemeldet sein.</p>	<p>Aus Sicherheitsgründen müssen Sie sich für die Synchronisierung mit Ihrer Benutzer-PIN anmelden.</p>	<p>Starten Sie die Anwendung „GT90 Archiv“ und geben Sie die Benutzer-PIN ein. Wiederholen Sie den Synchronisierungsvorgang erneut.</p>
<p>Die Verknüpfung <i>GT90 Status</i> und <i>GT90 Archiv</i> sind nicht mehr über den Desktop erreichbar.</p>	<p>Programmverknüpfungen auf dem Desktop können nur schwer gelöscht werden. Das GT90 mobil verfügt über zwei virtuelle Bildschirme, auf denen sich die Verknüpfungen höchstwahrscheinlich befinden.</p>	<p>Tippen Sie auf den Desktop und ziehen den Bildschirm nach links oder rechts, bis Sie die entsprechenden Symbole sehen. Lassen Sie dann den Desktop los.</p>
<p>Während der Durchführung eines Firmware-Updates: Keine Update-Datei für Firmware auf dem GT90 mobil vorhanden.</p>	<p>Es wurde keine Update-Datei (Format *.bin) auf der Mikro SD-Karte gespeichert.</p> <p>Die Mikro SD-Karte ist defekt.</p> <p>Es wurde keine Mikro SD-Karte eingelegt.</p>	<p>Stellen Sie sicher, dass eine funktionierende Micro SD-Karte in das Gerät eingelegt ist und sich auf dieser die Update-Datei für ein Firmware-Update befindet. Lesen Sie ggf. Abschnitt 4.5 „GT90 Admin – Firmware Update“.</p>

6. WEITERE INFORMATIONEN

6.1 Gerätesorgung



Elektrogeräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen in Europa nach dem 12. August 2005 nicht mehr über die öffentliche Abfallentsorgung entsorgt werden. In Übereinstimmung mit lokalen und nationalen europäischen Bestimmungen (EU-Richtlinie 2002/96/EC), müssen Benutzer von Elektrogeräten in Europa ab diesem Zeitpunkt alte bzw. zu verschrottende Geräte zur Entsorgung kostenfrei an den Hersteller zurückgeben.

Hinweis: Bitte wenden Sie sich an den Hersteller bzw. an den Händler, von dem Sie das Gerät bezogen haben, um Informationen für die Rückgabe des Altgerätes zur ordnungsgemäßen Entsorgung zu erhalten.

Wichtige Informationen - Bitte zusammen mit den Produktinformationen aufbewahren.

6.2 Technische Daten

Maße / Gewicht	8 cm x 13 cm x 1,6 cm / ca. 179 g (inkl. Batterie)
CPU / Prozessor	ARM / 32-bit high performance RISC / 293 MIPS @ 266 MHz
Betriebssystem	Android 2.1 / Linux 2.6.x
Speicher	
RAM:	64 MB SDRAM
FLASH:	256 MB Flash
Externer FLASH Speicher:	1 x MicroSD HC mit bis zu 16 GB (microSD Card Reader - Hinge Typ)
Schnittstellen	
USB:	1 x Full Speed Host / USB 2.0 kompatibel / Typ A 1 x Full Speed Client / USB 2.0 kompatibel / Typ Micro B
Chipkarten	
unterstützte Typen:	KVK, eGK, HBA, SMC, SM-KT, ISO 7816 Klasse A-, B- und C-Karten (5V, 3V, 1,8V)
Kontaktiereinheiten:	1 x Chipkarten Kontaktiereinheit gemäß ISO 7816 ID-1 für eGK oder KVK 1 x Chipkarten Kontaktiereinheit gemäß ISO 7816 ID-1 für HBA 1 x Kontaktiereinheiten gemäß ISO 7816 ID-000 für SMC-A oder SMC-B > 100 000 Steckzyklen für ID-1 Kontaktiereinheiten insbesondere eGK/KVK automatische Kartenerkennung mit Kurzschluss- und Überhitzungsschutz

Display	Touchfähiges 4,3“ TFT Display (resistiver Touchscreen)
	Auflösung: 480xRGBx272 stromsparende LED Hintergrundbeleuchtung
Gehäuse	verpresstes, 2 teiliges untrennbares ABS Kunststoffgehäuse
Schalter	1 x EIN/AUS Schalter mit Sleepfunktion 2 x Bedientaster
Optische & Akustische Signalinterfaces	1 x mehrfarbene LED (bspw. rot/grün) zur Anzeige von Betriebs- und Ladezuständen
	1 x eingebauter Lautsprecher und Mikrofon
Stromversorgung	austauschbarer Lithium Polymer Akku

6.3 Systemvoraussetzungen

Sie können das GT90 **mobil** mit den im Folgenden genannten Betriebssystemen nutzen:

- Microsoft Windows ab Windows XP mit Service Pack 3,
- Linux ab Kernelversion 2.6.x ,
- MacOS ab OSX 10.6 Snow Leopard.

Die benötigten Treiber und ggf. eine Installationsanleitung befinden sich auf der mitgelieferten Treiber CD oder auf den Internetseiten des Herstellers unter: www.germantelematics.de . Bitte lesen Sie auch Abschnitt 4.2 „Inbetriebnahme“ um zu erfahren wie Sie die benötigten Treiber auf Microsoft Windows Systemen installieren.


6.4 Realisierte Sicherheitsfunktionen

Die folgenden Sicherheitsfunktionen werden durch das mobile Chipkartenlesegerät GT90 **mobil** dem Nutzer zur Verfügung gestellt:

Aufbereiten von Speicherbereichen	Speicherbereiche, die z.B. im Zuge einer PIN-Eingabe genutzt wurden, werden auf sichere Weise gelöscht und wiederaufbereitet.
Anzeige der sicheren PIN-Eingabe	Das Gerät zeigt den sicheren PIN-Eingabemodus durch ein geschlossenes Schlosssymbol in der Statusleiste des Displays an.
Durchführung von Selbsttests	Das Gerät ist in der Lage, bestimmte Zustände selbstständig und automatisch zu überprüfen, um die Sicherheit der Firmware zu gewährleisten.
Identifikation und Authentifikation	Das Gerät ist in der Lage, einen Benutzer und einen Administrator PIN-basiert zu identifizieren und daraufhin diese für designierte Aktionen zu authentifizieren.
Management	Das Gerät stellt Funktionen zur Verfügung, mit denen ein Administrator Einstellungen an Sicherheitsrelevanten Parametern vornehmen kann.
Firmware-Download	Das Gerät kann von einem Administrator mit einer neuen Firmware bespielt werden.

6.5 Produktregistrierung

Auf der hinteren Umschlagseite dieses Benutzerhandbuches befindet sich ein Registrierungsformular. Durch das Ausfüllen und Zurücksenden dieses Registrierungsformulars registrieren Sie Ihr Chipkartenlesegerät, um es mit Hilfe eines Produktupdates in der späteren Online-Phase der Telematik Infrastruktur uneingeschränkt zu verwenden. Füllen Sie hierzu bitte das Formular aus und schicken es unterschrieben und mit dem Praxisstempel versehen per Fax an die folgende Faxnummer:

: +49 (0)30 – 31805454

Für eine Registrierung per E-Mail scannen Sie die ausgefüllte Umschlagseite ein und schicken das eingescannte Bild im .jpg oder .pdf Format an die folgende

E-Mail-Adresse:

: registration@germantelematics.de

6.6 Allgemeine Informationen

Ihr Chipkartenlesegerät GT90 **mobil** ist hardwareseitig bereits vollständig und ohne den Einbau weiterer Komponenten für die Ausbaustufe 2 gemäß den Spezifikationen der gematik GmbH verwendbar. Ihr Gerät wird lediglich durch ein Firmware-Update auf den vollen Funktionsumfang dieser Ausbaustufe 2 migriert. Dieses Firmware-Update kann bei Ihnen vor Ort durchgeführt werden. Weitere Informationen zur Einführung der elektronischen Gesundheitskarte und zur Telematikinfrastruktur im deutschen Gesundheitswesen finden Sie unter: www.gematik.de .

6.7 Geräte-Konformitätserklärung

Declaration of Conformity

Supplier's Name: GT German Telematics Gesellschaft für Telematikdienste mbH
Supplier's Address: Rankestraße 26
 10789 Berlin

Declares, that the product

Product Name: eHealth GT90 mobil
Regulatory Model: eHealth GT90 mobil

The product herewith conforms to the following Council Directives:
 EMC Directive 2004/108/EC,

International Standard (s) to which Conformity is Declared

Emissions: EN 55 022: 05.2008


Immunity: EN 55 024: 10.2003

Basic Standards: EN 61000-4-2:2001
 EN 61000-4-3:2006
 EN 61000-4-4:2005
 EN 61000-4-5:2007
 EN 61000-4-6:2008
 EN 61000-4-7:2004
 EN 61000-4-8:2001
 EN 61000-4-11:2005

Environment: RoHS, Restriction of Substances in Electrical & Electronic Equipment Directive (2002/95/EC).

Additional Information

The product herewith carries the CE, RoHS logos/markings.

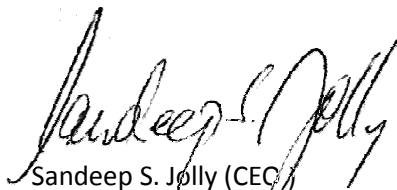

Sandeep S. Jolly (CEO)
 Date: 7th Mar, 2012

©2011 GT german telematics Gesellschaft für Telematikdienste mbH.
Alle Rechte vorbehalten. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Dieses Produkt beinhaltet Software lizenziert unter GPLv2 und LGPL. Weitere Details finden Sie auf der mitgelieferten
Treiber- CD.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.
(<http://www.openssl.org/>)

